

Карта проведения реанимации и интенсивной терапии

- 1. СЭМД 277 «Карта проведения реанимации и интенсивной терапии»

1. СЭМД 277 «Карта проведения реанимации и интенсивной терапии»

В программе реализована возможность по формированию СЭМД 277 «Карта проведения реанимации и интенсивной терапии».

СЭМД формируется автоматически при подписании документа.

Карта оформляется из журнала карт проведения реанимации и интенсивной терапии, расположенного по пути «Документы» – «Модуль врача» – «Журнал карт проведения реанимации и интенсивной терапии» (Рисунок 1).

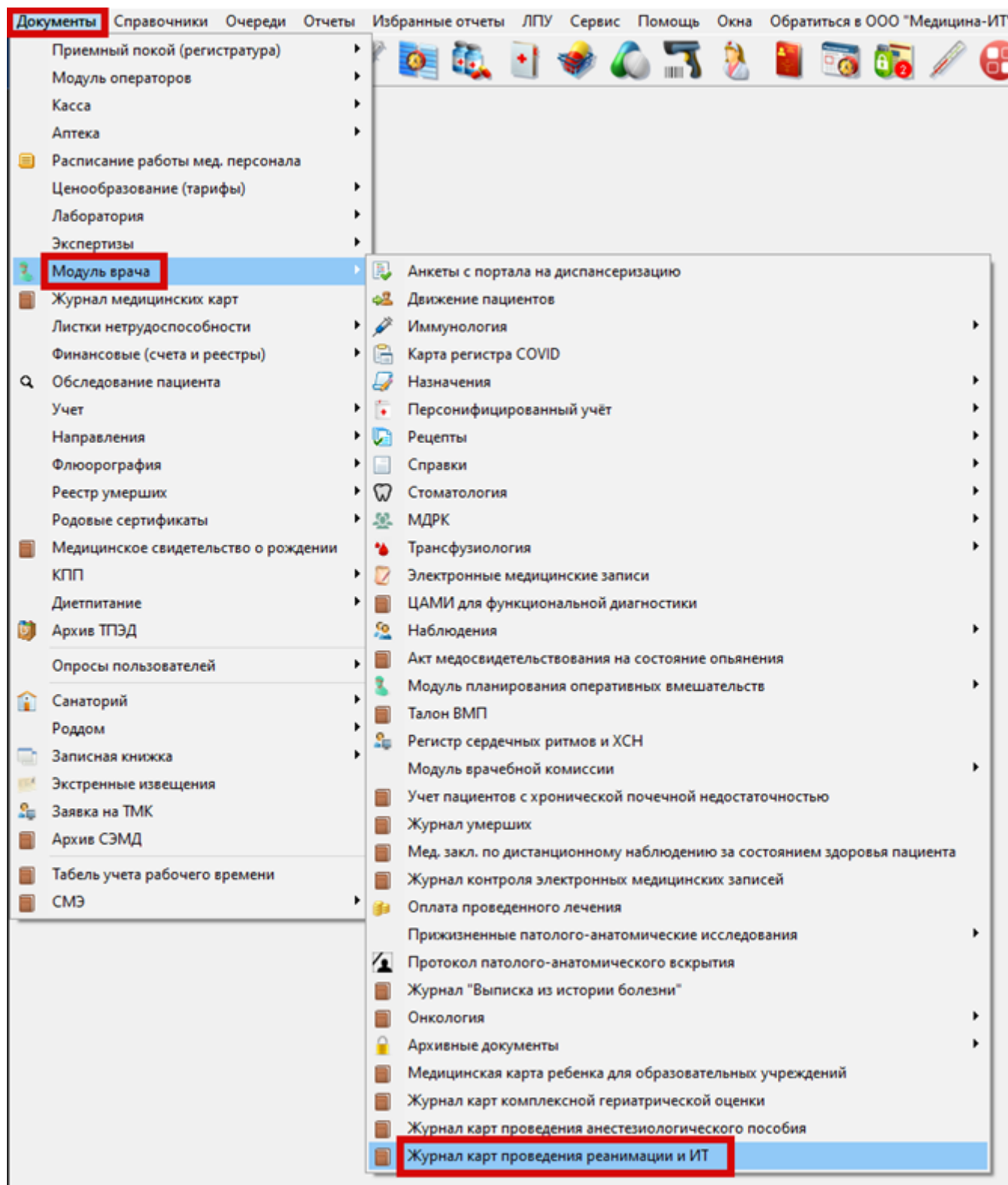


Рисунок 1 – Расположение журнала карт

В журнале карт будут отображены все созданные на пациентов карты (Рисунок 2).

Журнал карт проведения реанимации и интенсивной терапии

№: X Дата с: 06.07.2026 по: 13.07.2026 ...

Пациент: ... Q X Отделение: ... Q X

Врач: ... Q X История болезни: ... Q X

Статус	Номер	Дата документа	Наименование	Пациент	Врач
<Нет данных для отображения>					

Записей: 0 Отбор по периоду: ...

Рисунок 2 – Журнал карт проведения реанимации и интенсивной терапии

В данном журнале можно отфильтровать записи по номеру, пациенту, врачу, отделению или истории болезни. Фильтр по дате по умолчанию установлен на неделю назад от текущей даты. При необходимости даты изменяются путем выбора даты из календаря.

Для создания новой карты необходимо нажать на «+» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Создание новой карты

Вкладка «Основные данные»

Далее в верхнем правом углу ввести номер карты и нажать Enter либо нажать на «...» и выбрать карту из журнала (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Ввод номера карты

После ввода номера карты, происходит частичное заполнение данными пациента: отделение, рост, масса, группа крови, резус-принадлежность, фенотип. Данные берутся из регистрации случая, если информация отсутствует, то из карточки пациента (Рисунок 5).

Документ: Карта проведения реанимации и интенсивной терапии (Новый)

История Подписки: Отсутствует Автор: Администратор

ТЕСТ А ТЕСТ ТЕСТ, 03.01.2002, 24 года
 Стационарная карта №7 (20.03.2026); ОМС; Терапевтическое отделение

Номер: от 14.07.2026 10:41:05 Врач: Администратор (Медицина ИТ) Мед. сестра:

Основные данные Проведение реанимации и ИТ Аллергические реакции Шкалы и опросники

Отделение пациента: Терапевтическое отделение

Рост (см): 180 Масса (кг): 75 Группа крови: O(I) Резус-принадлежность: Rh(D)+, положительный резус-фактор

Фенотип: CC Ее: K, Келл-отрицательный (поиск антигена Селло не проводился)

Дополнительная информация:

Диагнозы:

Вид заболевания	Диагноз	Дата установок	Клиническая формулировка	Степень обоснованности	Характер заболевания	Внешняя при
«Нет данных для отображения»						

Печать Подписать и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 5 – Частичное заполнение данными

Далее выбирается медицинская сестра из справочника «Медицинский персонал».

Поле «Дополнительная информация» является полем для ввода.

Ниже располагается таблица «Диагнозы». Добавление строки происходит по нажатию на кнопку «+».

В столбце «Вид заболевания» выбирается значение из справочника «Виды нозологических единиц диагноза» (Рисунок 6). Столбец является обязательным для заполнения.

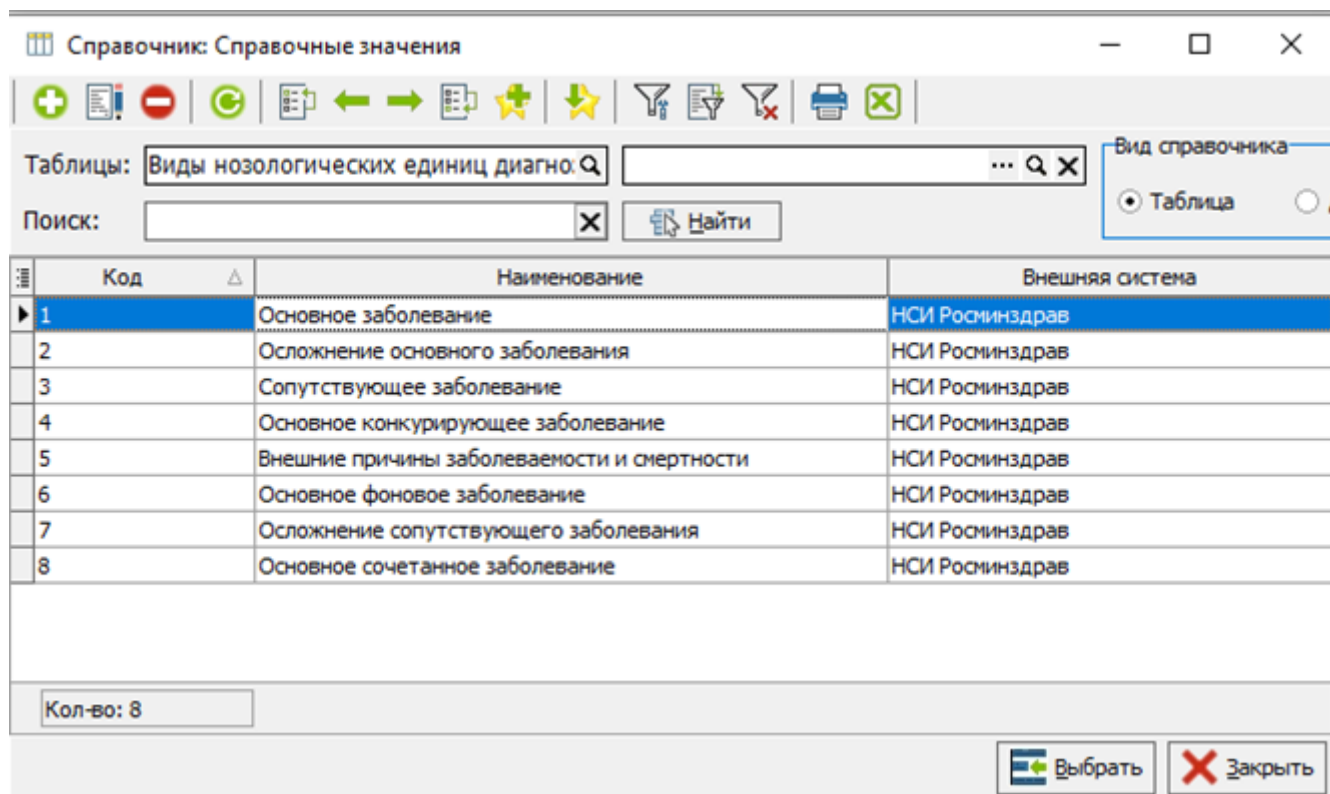


Рисунок 6 – Виды нозологических единиц диагноза

Столбец «Диагноз» заполняется из справочника «Классификатор заболеваний МКБ-10» (Рисунок 7). Столбец обязателен для заполнения.

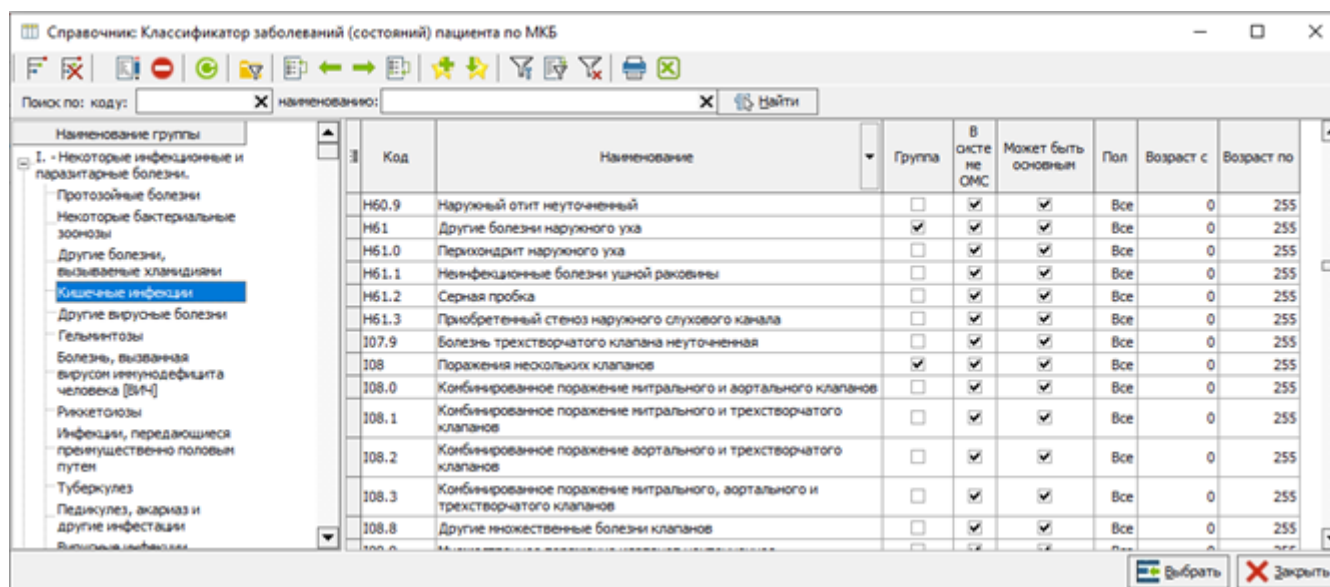


Рисунок 7 – Классификатор заболеваний МКБ-10

Дата установки диагноза выбирается из календаря.

В столбец «Клиническая формулировка» вносится развернутый диагноз.

В столбце «Степень обоснованности» выбирается одно значение из списка: «Предварительный клинический диагноз», «Этапный клинический диагноз», «Заключительный клинический диагноз».

«Характер заболевания» выбирается из списка: «Впервые в жизни установленное хроническое», «Острое», «Ранее установленное хроническое».

«Внешняя причина» заполняется из «Классификатор заболеваний МКБ-10».

«Вид травмы по способу получения» заполняется из соответствующего справочника (Рисунок 8).

Код	Наименование	Дата окончания	Внешняя система	Дополнительный код
8	Бытовая		НСИ Роснздрав	
17	ДТП		НСИ Роснздрав	
7	Производственная		НСИ Роснздрав	
14	Производственная прочая		НСИ Роснздрав	
10	Производственная транспортная		НСИ Роснздрав	
11	Производственная транспортная: ДТП		НСИ Роснздрав	
1	Производственная		НСИ Роснздрав	
6	Производственная прочая		НСИ Роснздрав	
3	Производственная транспортная		НСИ Роснздрав	
5	Производственная транспортная: ДТП		НСИ Роснздрав	
2	Промышленная		НСИ Роснздрав	
15	Противоправная		НСИ Роснздрав	
18	Прочая		НСИ Роснздрав	
4	Сельскохозяйственная		НСИ Роснздрав	
13	Спортивная		НСИ Роснздрав	
16	Транспортная		НСИ Роснздрав	
9	Уличная		НСИ Роснздрав	
12	Школьная		НСИ Роснздрав	

Рисунок 8 – Справочник «Вид травмы по способу получения»

Для столбца «Дата установления диагноза впервые в жизни» выбирается из календаря.

«Достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни» выбирается одним значением из списка: «В бумажной форме», «В электронной форме», «На основании медицинской документации», «Со слов законного (уполномоченного) представителя», «Со слов пациента».

Срок беременности указывается в неделях.

В поле «Дополнительные сведения» при необходимости вносится уточняющая информация.

Вкладка «Проведение реанимации и ИТ»

На вкладке представлена информация о назначенных медикаментах, витальных параметрах, гидробалансе, оборудовании и шкалах или опросниках (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Вкладка «Проведение реанимации и ИТ»

«Рабочие сутки с:» представляют собой выбор из календаря с указанием времени. Поле обязательно для заполнения.

Кнопка «Назначить ЛС» открывает окно назначения лекарственных средств (Рисунок 10).

Элемент справочника: Назначение лекарственных средств (Новый)

История Подбор Автор: Администратор Подпись: Отсутствует Инфузат

Препарат: ... Q X
 Дата начала с: 23.06.2026
 Кол-во дней: 1

Доза: 0
 Лек. форм: ... X
 Время приема: 10:00 ... X

☐ Признак редукции

Способ: ... Q X

Дата	День недели	Время	Мед. сестра.	Продолжительность (ч)	Скорость (мл/час)	Находится в заявке	Принято в работу
23.06.2026	Вторник	10:00		0		☐	☐

Комментарий: ☐ Медикамент пациента

Отменить с: Причина отмены: ... Q X

Рисунок 10 – Назначение лекарственного средства

Кнопка «Добавить витальный параметр» добавляет параметры «ЦВД» (Центральное венозное давление) и ВЧД (Внутричерепное давление).

Кнопка «Добавить параметр гидробаланса» позволяет добавить значение из справочника «Параметры гидробаланса» (Рисунок 11).

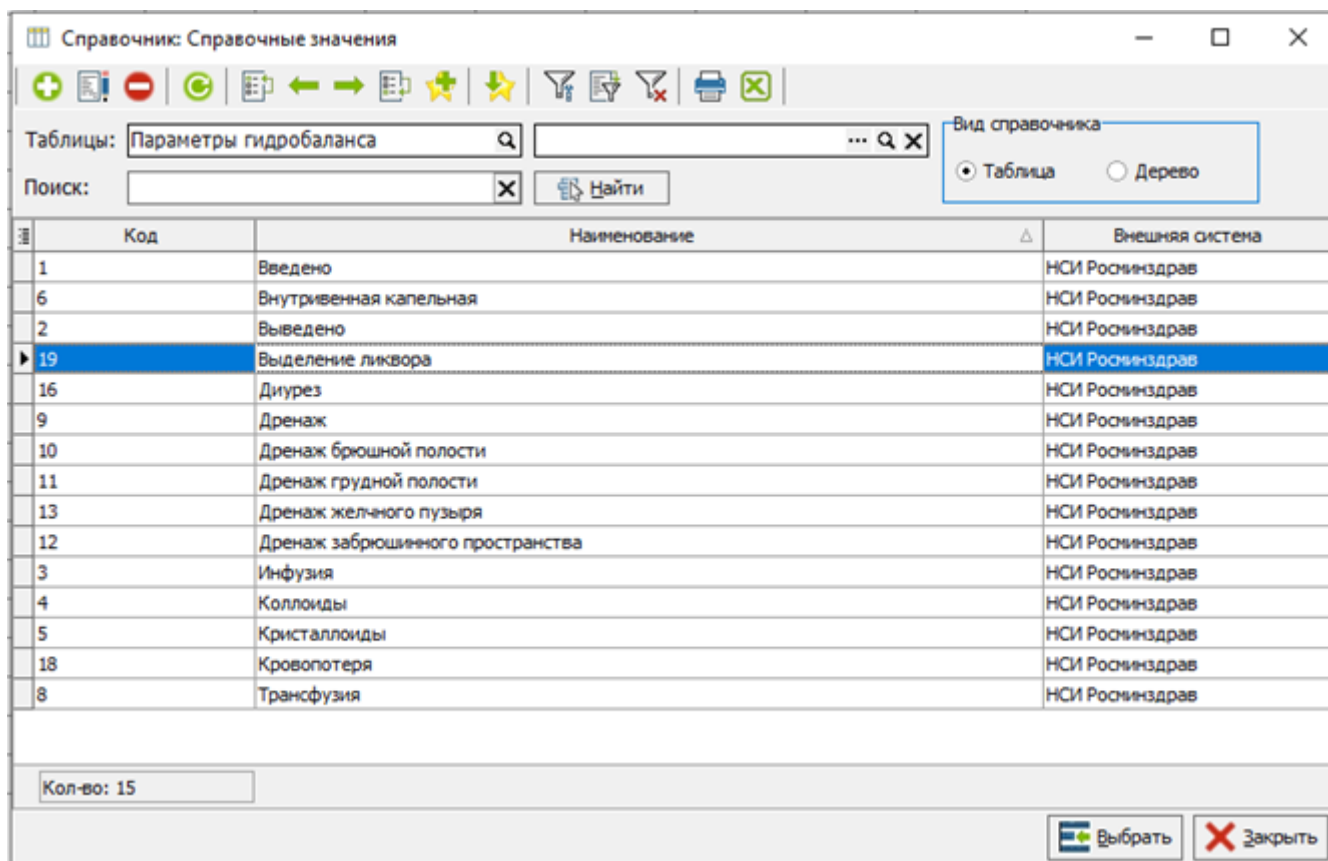


Рисунок 11 – Выбор параметров гидробаланса

Кнопка «Задать параметры ИВЛ» открывает окно, где необходимо указать примененное оборудование (Рисунок 12).


Примененное оборудование
✕

Оборудование: ...  
Кол-во:

Дыхательный контур:

Газовый состав смеси:









	Газ	Ед. измерения	Примечание
<Нет данных для отображения>			

↑

Параметры наркозного аппарата или аппарата искусственной вентиляции легких:









	Параметр	Ед. измерения	Примечание
▶	Положительное давление в конце выдоха	Сантиметр водяного столба (см вод.ст.)	
	Минутный объем	Литр в минуту (л/мин)	
	Пиковое давление на вдохе	Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.)	
	Соотношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха		
	Фракция кислорода на вдохе (ИВЛ)	Процент (%)	
	Дыхательный объем (ИВЛ)	Миллилитр (мл)	
	Минутный объем дыхания	Литр в минуту (л/мин)	
	Частота дыхания (ИВЛ)	Количество в минуту (1/мин)	

Примечание:


Сохранить и закрыть


Закрыть

Рисунок 12 – Примененное оборудование

Выбор оборудования происходит из справочника «Оборудование медицинской организации» (Рисунок 13). Если список отображается пустым, то необходимо убрать фильтрацию по отделению.

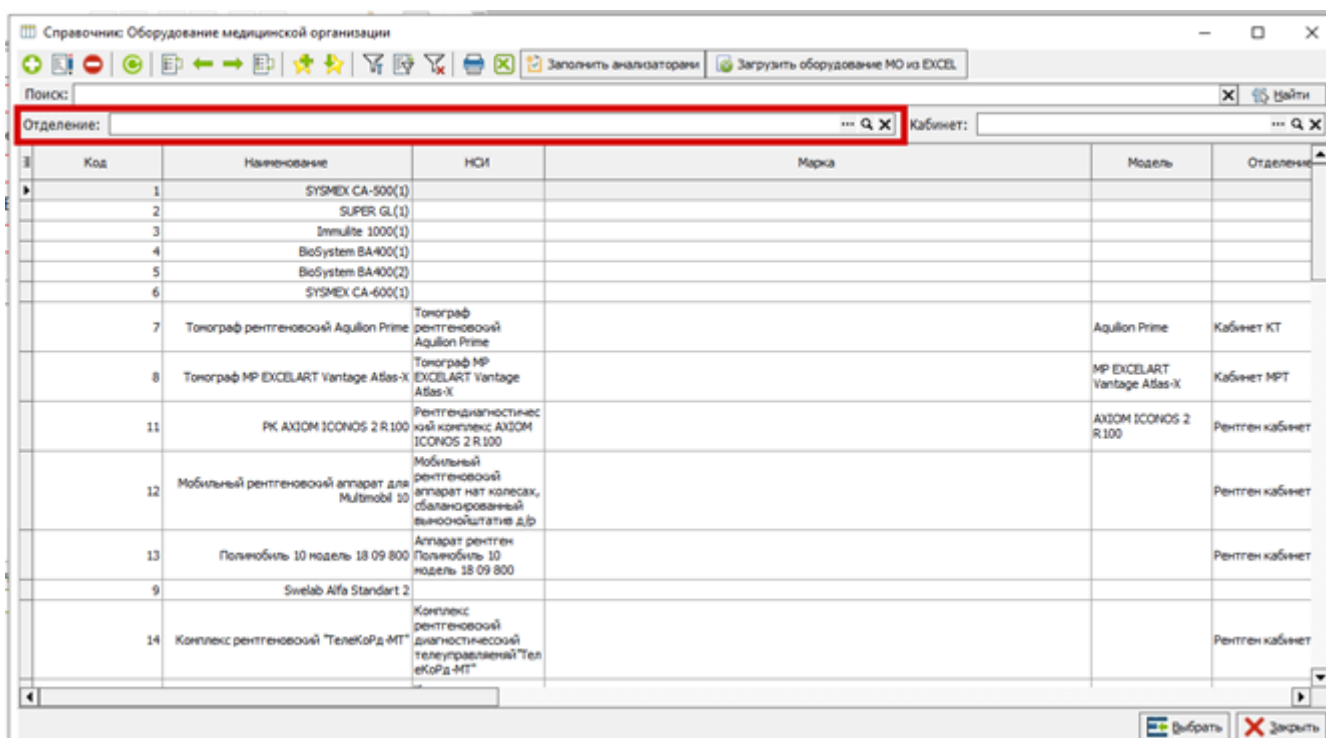


Рисунок 13 – Выбор из справочника «Оборудование медицинской организации»

Далее, при необходимости, указываются «Количество» и «Дыхательный контур», который имеет следующие значения: «Закрытый», «Полузакрытый», «Открытый» и «Полуоткрытый».

Далее заполняется «Газовый состав смеси». Добавление происходит по кнопке «+». В столбце «Газ» выбирается значение из справочника «Компоненты газовой смеси для ингаляционной анестезии» (Рисунок 14), в столбце «Единицы измерения» одно из значений: «л/мин», «мл/мин», «об.%» или пустое значение. Столбец «Примечание» является необязательным для заполнения.

Справочник: Справочные значения

Таблицы: Компоненты газовой смеси для ингаляционной анестезии

Поиск: Найти

Вид справочника: ☒ Таблица ☐ Дерево

Код	Наименование	Внешняя система
730	Галотан	НСИ Росинздрав
3710	Десфлуран	НСИ Росинздрав
1146	Динитрогена оксид	НСИ Росинздрав
1335	Изофлуран	НСИ Росинздрав
1620	Кислород	НСИ Росинздрав
1722	Ксенон	НСИ Росинздрав
2631	Севофлуран	НСИ Росинздрав
3360	Эфир диэтиловый	НСИ Росинздрав

Кол-во: 8

Выбрать Заккрыть

Рисунок 14 – Справочник «Компоненты газовой смеси для ингаляционной анестезии»

Ниже находятся «Параметры наркозного аппарата или аппарата искусственной вентиляции легких». В табличной части уже предустановлены значения и единицы измерения. При необходимости добавления дополнительного параметра, нажать на «+» и выбрать из справочника «Параметры наркозного аппарата и аппарата искусственной вентиляции легких» (Рисунок 15).

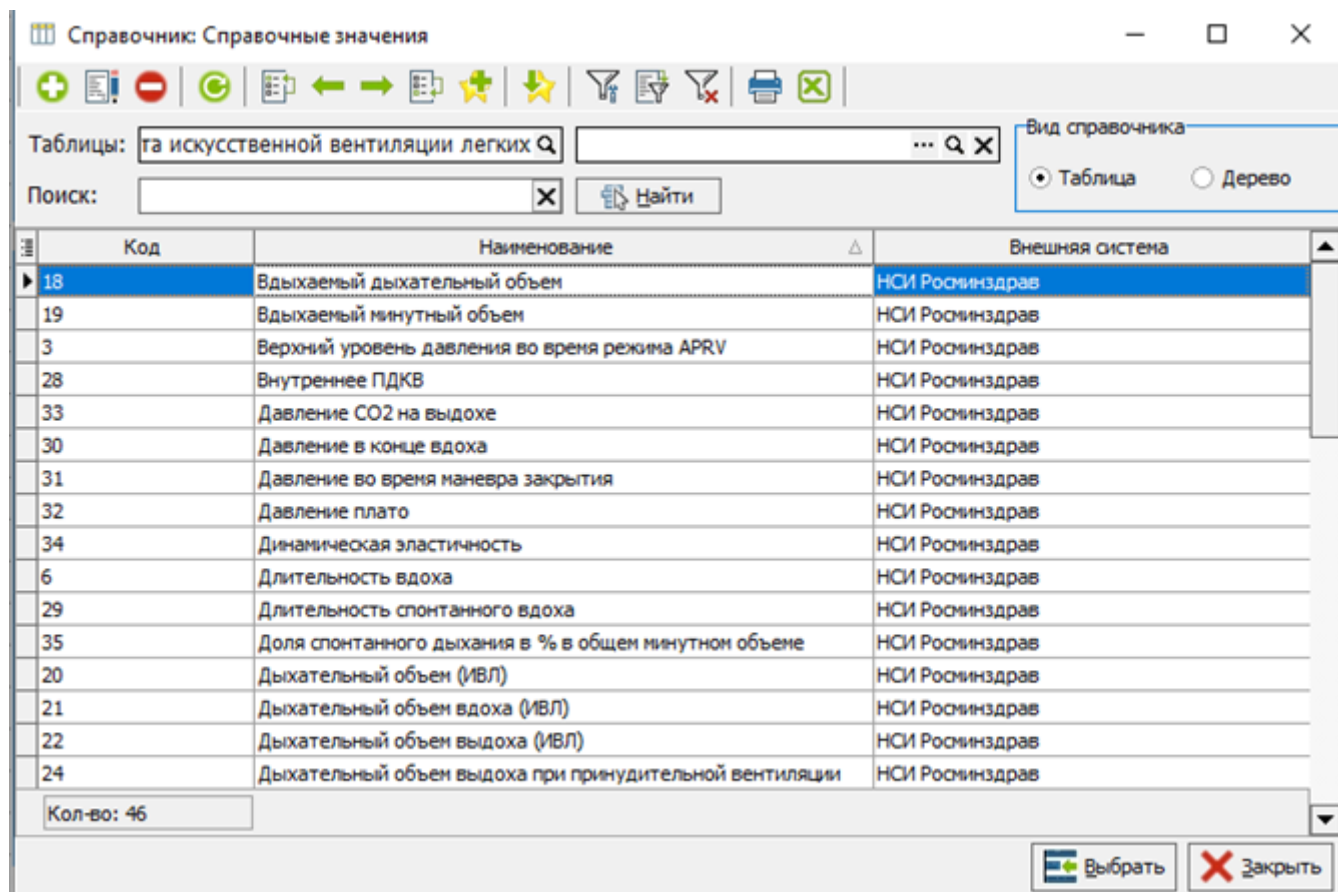


Рисунок 15 – Выбор из справочника «Параметры наркозного аппарата и аппарата искусственной вентиляции легких»

Кнопка «Добавить шкалу или опросник» открывает справочник «Перечень клинических шкал и опросников» (Рисунок 16). После выбора шкалы, программа автоматически перейдет на вкладку «Шкалы и опросники».

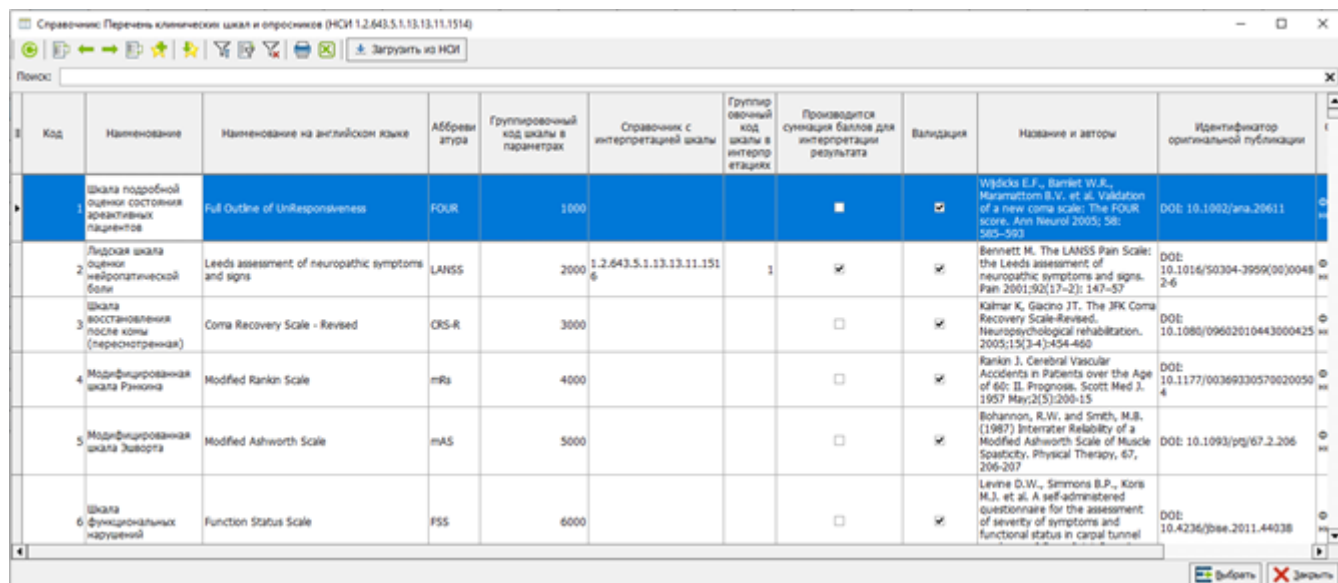


Рисунок 16 – Справочник «Перечень клинических шкал и опросников»

Табличная часть карты реанимации и ИТ представлена на рисунке 17.

Document: Карта проведения реанимации и интенсивной терапии (Новый)

Пациент: Администратор | Автор: Администратор

ТЕСТИКОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ, 15.03.2001, 35 лет
Статьи: №10612 (3.4.01.2034), Школьные уроки, Гематологические исследования (гематологические для взрослых)

Номер: 5 | от 13.07.2026 16:05:19 | Врач: Администратор (Медицина ИТ) | Мед. сектор:

Основные данные: Проведение реанимации и ИТ | Аллергическая реакция | Шкалы и опросники

Рабочие сутки с: 13.07.2026 по 14.07.2026

Дата	13.07	14.07																														
Время	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
Температура тела, °C																																
САД, мм рт.ст.																																
ДАД, мм рт.ст.																																
ЧСС, 1/мин																																
ЧД, 1/мин																																
Характеристика дыхания																																
ЧВ, 1/мин																																
ЧСС, %																																
Внутренняя капиллярная, мм																																
Кровоотток, мм																																

Аллергии: Не известны ИФЭПТ | Мед. оборудование:

Выполнено полностью | Выполнено частично | Отмена назначения | Не было выполнено

Открыть | Отменить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 17 – Отображение всех вкладок в проведенном пособии

Значения выбираются из справочников или заполняются вручную.

Витальные параметры проставляются вручную по двойному щелчку ЛКМ в соответствующую ячейку.

По щелчку ПКМ на ячейке доступно контекстное меню (Рисунок 18).

Номер: от Врач:

Основные данные Аллергические реакции | Шкалы и опрос

Рабочие сутки с: по 14.07.2026

	Дата	13.07 ПН				
Все	Время	08:00	09:00	10:00	11:00	1
Медикаменты	Внутривенная капельная, мл.					
Витал. парамет	Кровопотеря, мл.					

Рисунок 18 – Вызов контекстного меню

Контекстное меню также доступно для строки мед.оборудование (Рисунок 19).

Мед. оборудование:

Рисунок 19 – Контекстное меню для оборудования

Вкладка «Аллергические реакции»

Во вкладку «Аллергические реакции» вносится информация об аллергене, типе реакции, самой реакции и дате начала проявления. Для создания записи нажать на «+» (Рисунок 20).

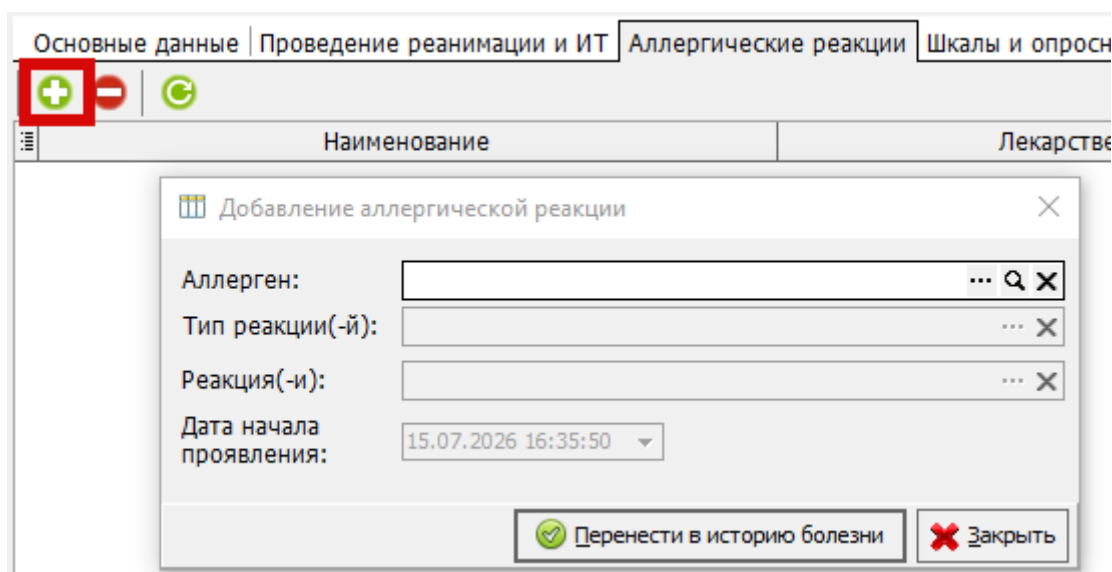


Рисунок 20 – Создание записи об аллергической реакции

Выбрать из справочника «Аллергены» (Рисунок 21). Если необходимого нет, то добавить по кнопке «+».

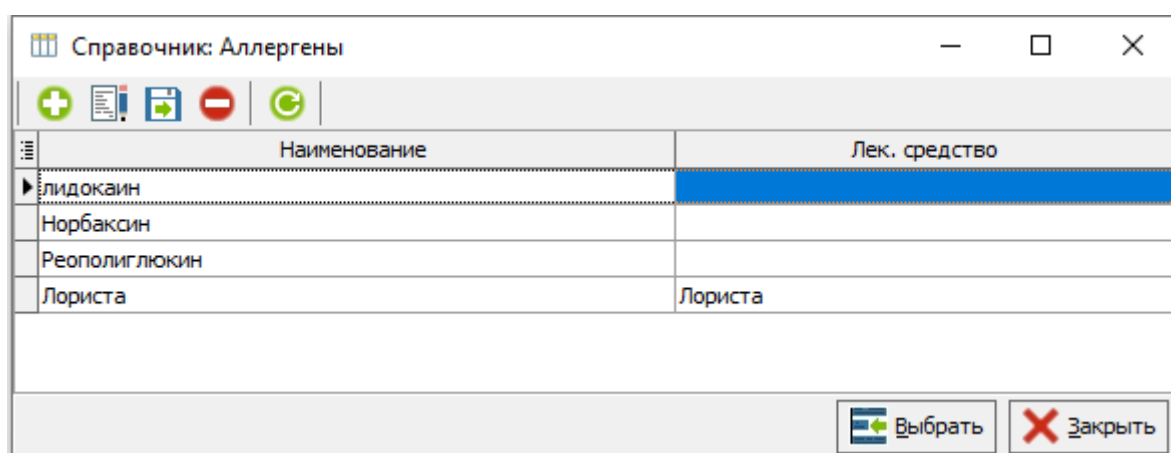


Рисунок 21 – Справочник «Аллергены»

Далее выбирается тип реакции из справочника «Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза» (Рисунок 22).

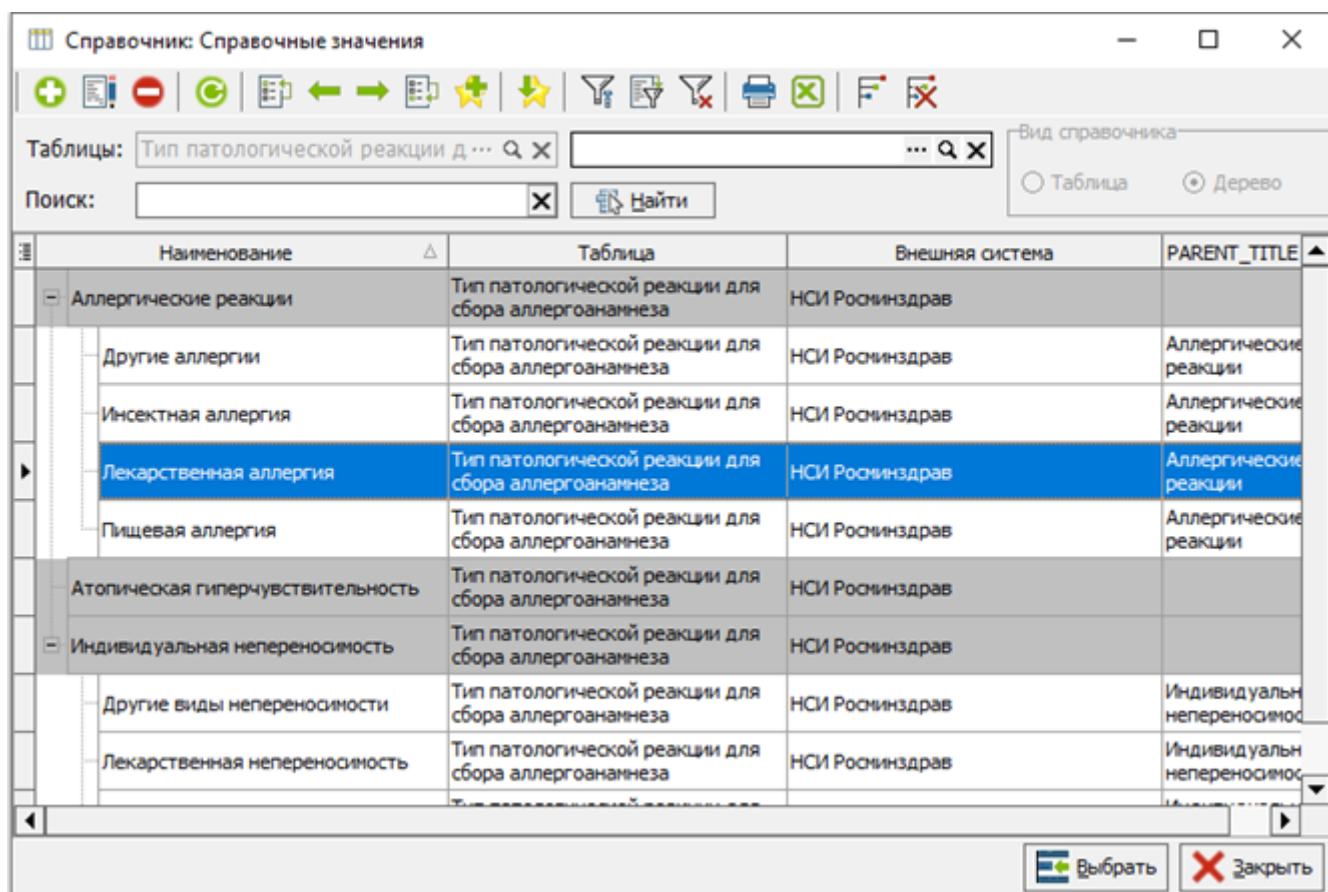


Рисунок 22 – Справочник «Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза»

Далее выбирается реакция из справочника «Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза» (Рисунок 23).

Справочник: Справочные значения

Таблицы: Основные клинические проявл ...

Поиск: Найти

Вид справочника: ☒ Таблица ☐ Дерево

№	Код	Наименование	Внешняя система
1		Анафилактический шок	НСИ Росминздрав
2		Ангионевротический отек	НСИ Росминздрав
3		Бронхообструктивный синдром	НСИ Росминздрав
4		Бронхоспазм	НСИ Росминздрав
13		Васкулит	НСИ Росминздрав
15		Другие клинические проявления патологических реакций	НСИ Росминздрав
12		Зуд	НСИ Росминздрав
6		Контактный дерматит	НСИ Росминздрав
9		Конъюнктивит	НСИ Росминздрав
7		Крапивница	НСИ Росминздрав
14		Лихорадка	НСИ Росминздрав
11		Поллиноз	НСИ Росминздрав
10		Ринит	НСИ Росминздрав
5		Экзема	НСИ Росминздрав
8		Эритема	НСИ Росминздрав

Кол-во: 15

Выбрать Закреть

Рисунок 23 – Справочник «Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза»

После этого проставляется дата начала проявления, путем выбора даты из календаря (Рисунок 24).

Добавление аллергической реакции

Аллерген:

лидокаин

...

Q

X

Тип реакции(-й):

Лекарственная аллергия

...

X

Реакция(-и):

Зуд

...

X

Дата начала проявления:

23.06.2026 14:13:23

▼

30 июня 2026 г.

Июнь 2026

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Сегодня

Сейчас

Очистить

OK

14:13:23

▲▼

Рисунок 24 – Выбор даты начала проявления

После указания даты нажать на кнопку «Перенести в историю болезни». Данные отобразятся на вкладке. Количество строк не ограничено.

Вкладка «Шкалы и опросники»

На данной вкладке отображаются ранее выбранные шкалы и опросники. Также возможно добавление новых через кнопку «+». Общий вид вкладки представлен на рисунке 25.

Документ: Карта проведения реабилитации и интенсивной терапии ИТ от 13.07.2026 15:52:38

Пользователь: Администратор Автор: Администратор

TEST A TEST TEST, 43.01.2002, 24 года

Стен. карта ИТ (28.03.2026), ОМС: Территориальный отдел

Номер: 1 от 13.07.2026 15:52:38 Врач: Администратор (Медицина ИТ) Мед. сектор: Реабилитационный

Основные данные / Проведение реабилитации и ИТ / Аллергические реакции / Шкалы и опросники

Шкала или опросник	Дата и время	Общий балл	Интерпретация	Врач, проводивший оценку	Примечание
Шкала подробной оценки состояния арестантов пациентов	13.07.2026 11:46:36	10	Неврологический синдром формирования болевых ощущений на фоне		
Леская шкала оценки неврологической боли					

Оценка боли

Проявляется ли визуально аналоговой шкале боли, боль в виде странных неприятных ощущений на коже. Можно ли сравнить эти ощущения с покалыванием?

☐ НЕТ – Боль, которую я испытываю, нельзя описать таким образом

☒ ДА – Меня довольно часто беспокоит подобное ощущение

Изменяется ли кожа в области локализации боли. Появляется ли она пятнами. Выглядит ли покрасневшей?

☐ НЕТ – Боль не влияет на внешний вид кожи

☒ ДА – Так, где меня беспокоит боль, внешний вид кожи отличается от нормального

Повышена ли чувствительность к прикосновению на пораженном участке кожи. Можно ли сказать, что легкое поглаживание кожи, сопряженное с одержкой вызывает неприятные или болевые ощущения?

☐ НЕТ – На пораженном участке кожи чувствительность не изменилась

☒ ДА – На пораженном участке чувствительность кожи повышена

Появляется ли боль внезапно, в покое без видимых причин. Можно ли описать ее как пульсирующую, разрывную или похожую на удар электрическим током?

☐ НЕТ – Мои ощущения нельзя описать подобным образом

☒ ДА – Меня довольно часто беспокоит подобное ощущение

Ощущается ли температура кожи на пораженном участке от температуры остальной поверхности кожи. Можно ли описать подобные ощущения как жжение или жар?

☐ НЕТ – Меня не беспокоит подобное ощущение

☒ ДА – Меня довольно часто беспокоит подобное ощущение

Оценка чувствительности

Аллопатия

☒ Чувствительность одинакова на обеих участках

☐ Аллопатия только на пораженном участке

Изменение порога болевой чувствительности

Оценить

Оценить и закрыть

Сравнить

Закрыть

Рисунок 25 – Вкладка «Шкалы и опросники»

Визуально вкладка разделена на 3 зоны.

В первой отображены названия выбранных шкал, во второй пункты, которые содержит шкала, в третьей – дата и время заполнения, общий балл (если такой имеется), интерпретация в зависимости от количества баллов, врач, проводивший оценку и поле для ввода примечания.

После заполнения карты, ее необходимо подписать.

Можно распечатать данную карту по кнопке «Печать».