

# Настройка приложения

## Минимальные системные требования для планшетов:

- Центральный процессор: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
- Память: 4 гб / 64 гб
- Разрешение дисплея: 1280x800 (px)
- Тип соединения: Bluetooth (4.2), WiFi (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, SIM-карта
- Операционная система: Android 9.0 / РЕД ОС М v.04,

## Подключение планшета к базе данных МО

- Для работы во внутренней сети планшет использует подключение по WI-FI, в настройках приложения в поле "Настройки подключения" указывается IP адрес сервера на котором работает Сервер КСАМУ
- Для работы по мобильной сети, в настройках приложения в поле "Настройки подключения" указывается внешний IP адрес сервера на котором работает Сервер КСАМУ

Приложение "Мобильный доктор" использует для подключения и обмена данными порт 55055, он должен быть проброшен для корректного подключения.

## Настройки справочников в КСАМУ

Для работы в приложении, в РМИС «КСАМУ» должны быть настроены некоторые справочники:

- Справочник [«Пользователей»](#)
- Справочник «Автомобилей МО»: для настройки необходимо перейти в пункт меню «Справочники» → «Прочие справочники» → «Автомобили МО». В открывшемся журнале используя кнопку добавления, заполнить данные об автомобиле (рисунок 1).

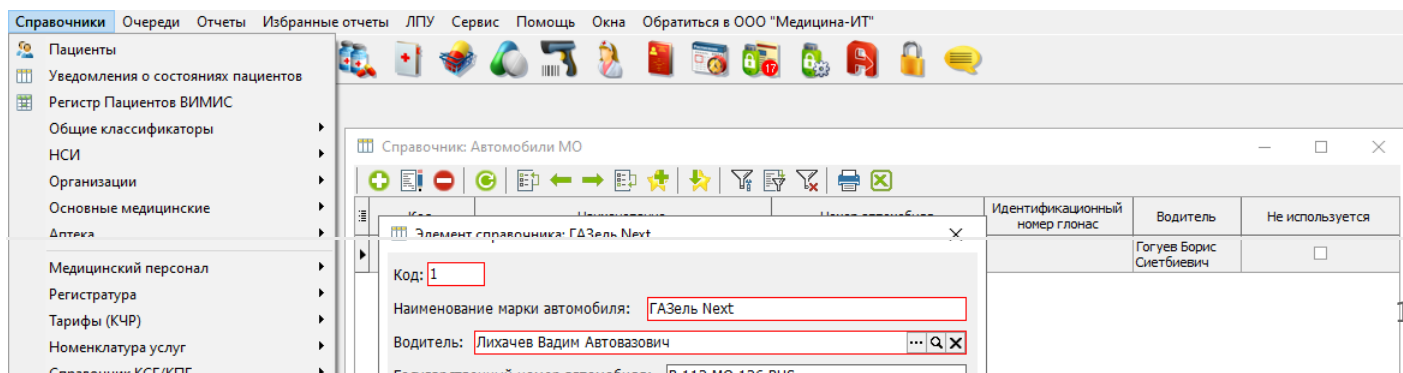


Рисунок 1 - Настройка справочника «Автомобилей МО»

## **Настройки приложения**

На мобильном устройстве нажатием на соответствующую иконку запустить приложение «Мобильный доктор» (рисунок 2)




Мобильный док...



3°

Москва  
Облачно

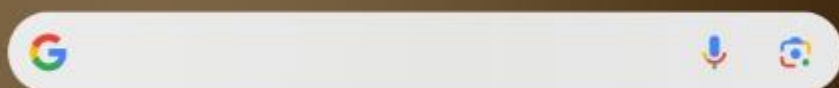

Галерея



Календарь



Game Launcher



Store




Google Play



Google



После  
нажа  
(рису

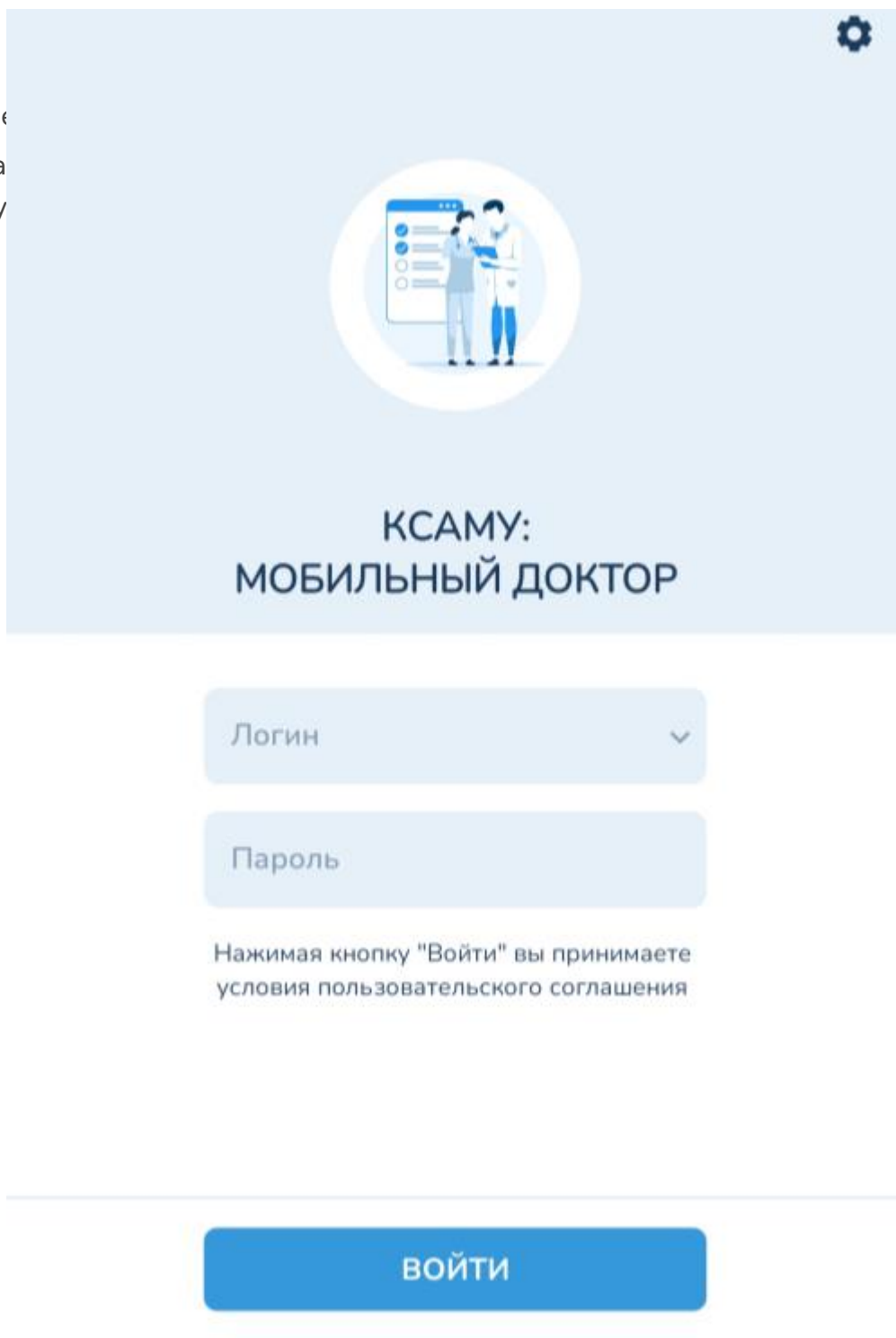


The image shows a user login interface for a mobile application. At the top right, there is a gear icon for settings. In the center, there is a circular illustration of two medical professionals, a doctor and a nurse, standing next to a tablet displaying a checklist. Below the illustration, the text reads "КСАМУ: МОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР". There are two input fields: "Логин" (Login) with a dropdown arrow and "Пароль" (Password). Below the fields, a note states: "Нажимая кнопку 'Войти' вы принимаете условия пользовательского соглашения". At the bottom, there is a prominent blue button labeled "ВОЙТИ" (Login).

зователя (рисунок 3),  
) настроек программы

Рисунок 3 – Окно

авторизации пользователя

применить

- Настройки подключения
- Поля в списке пациентов
- Вид списка вызовов врача 

---

**ПРИМЕНИТЬ**

Рисунок 4 – Окно

настроек программы

---

В окне настроек мобильного приложения в поле «Настройки подключения» необходимо указать IP-адрес серверного компьютера, на котором развернута база данных РМИС «КСАМУ» (рисунок 5).

**Важно!** IP-адрес серверного компьютера должен быть доступен мобильному устройству для подключения по сети Wi-Fi.

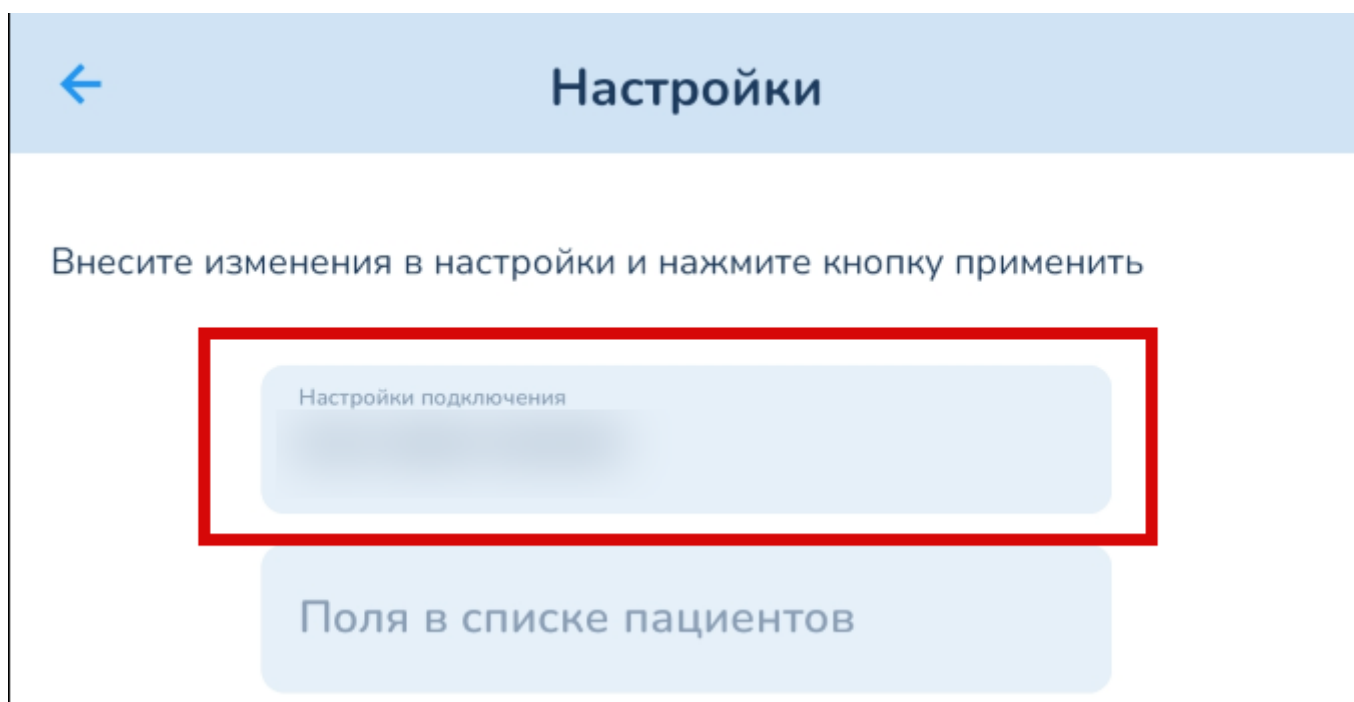


Рисунок 5 – Поле «Настройки подключения»

В поле «Вид списка вызовов врача» нужно выбрать «Неотложная помощь на дому» (рисунок 6).

Настройки подключения

Поля в списке пациентов

Вид списка вызовов врача



Посещения на дому

Неотложная помощь на дому

**ПРИМЕНИТЬ**

Рисунок 6 –

Настройка вида списка вызовов врача на дом

После того как вышеуказанные настройки будут выполнены, их нужно сохранить нажав на кнопку «Применить». После этого, с помощью кнопки «Назад» возвращаемся на окно авторизации пользователя (рисунок 7).

Настройки подключения

192.168.136.89

Поля в списке пациентов

|

Вид списка вызовов врача

Неотложная помощь на дому



1

ПРИМЕНИТЬ

Рисунок 7 -

Применение настроек (1) и возврат к окну авторизации пользователя (2)

Revision #6

Created 28 October 2025 12:54:04 by Бондаренко Андрей

Updated 7 November 2025 08:16:27 by Панченко Андрей

1 10