


Инструкция по настройке и работе учёта реагентов.

Перейдите в раздел: Справочники → Лаборатория → Сопоставления → Реагенты.

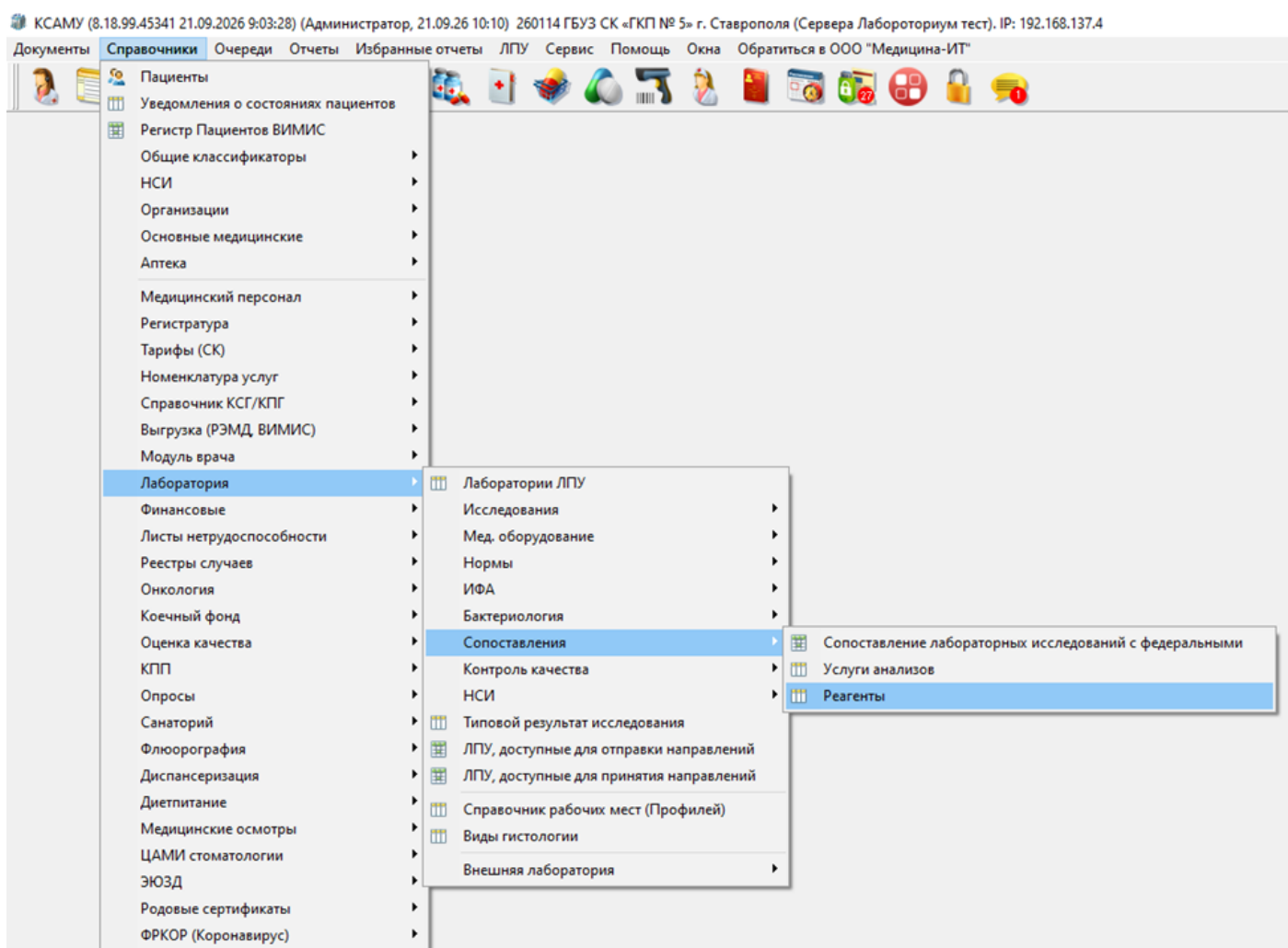

Добавление сопоставления

В справочнике «Расход реагентов лаборатории» нажмите «Добавить новый элемент» и заполните поля:

Справочник: Расход реагентов лаборатории

Исследование: ... Q X Анализатор: ... Q X

Реагент: ... Q X Поиск: X Найти

Код	Наименование	Исследование	Анализатор	Анализ-родитель
1	Амилаза биохимия	- Амилаза общая	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Accent 300	Биохимический анализ крови
2	Биохимия	Биохимический анализ крови	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Accent 300	
3	Холестерин биохимия	- Холестерин	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Accent 300	Биохимический анализ крови
4	Моча dirui	Общий анализ мочи	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Accent 300	Общий анализ мочи
5	Antos-2010 Прогестерон	Определение уровня прогестерона в крови	Antos-2010	Определение уровня прогестерона в крови
6	амилаза антос	- Амилаза общая	Antos-2010	Биохимический анализ крови

Элемент справочника: Справочник: (Новый)

Код: 0 Наименование:

Анализ: ... Q X

Анализатор: ... Q X

Реагент

Единица измерения

Расход

Сохранить и закрыть Сохранить X Закрыть


1. Код — код элемента справочника. Заполняется автоматически.
2. Наименование — укажите название элемента справочника. Нигде не подтягивается, используется только для удобства поиска в справочнике.

3. Анализ — исследование, к которому сопоставляется реагент. Важно: нужно указать именно исследование, а не анализ. Если сопоставить анализ, то реагент не будет подтягиваться к результату этого анализа.
4. Анализатор — анализатор, к которому сопоставляется реагент.
5. Реагент — реагент, используемый для указанного исследования.
6. Единица измерения — единица измерения для реагента.
7. Расход — расход реагента при выполнении анализа.

Подтягивание реагента в результат.

Перед подписанием результатов, обязательно должно быть заполнен анализатор у всех полей со значениями.

При импортировании результатов, в поле анализатор подтягивается автоматически.

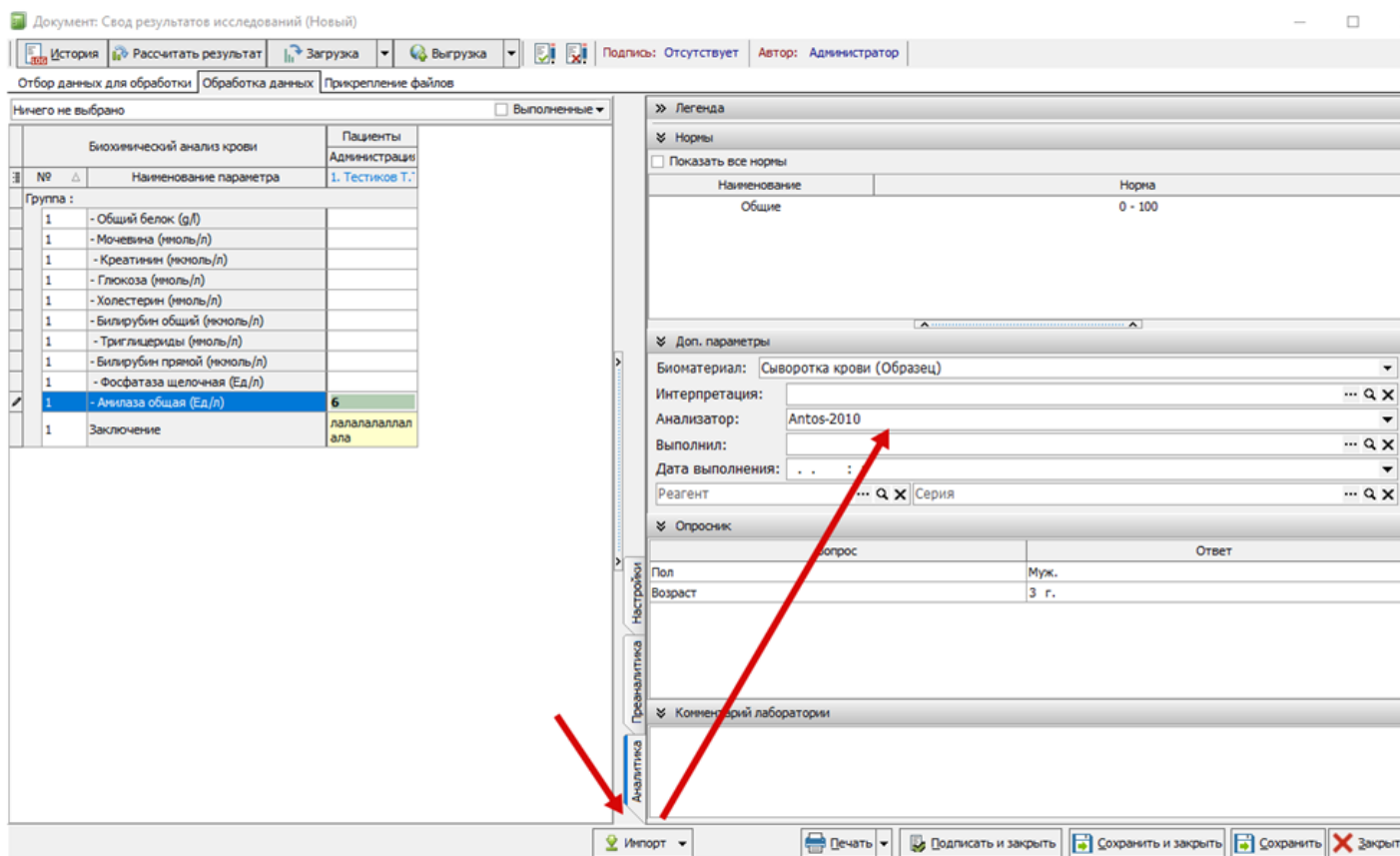

Документ: Свод результатов исследований (Новый)

История | Рассчитать результат | Загрузка | Выгрузка | Подпись: Отсутствует | Автор: Администратор

Отбор данных для обработки | Обработка данных | Прикрепление файлов

Ничего не выбрано

Биохимический анализ крови		Пациенты
№	Наименование параметра	Администрация
1	- Общий белок (g/l)	1. Тестиков Т.
1	- Мочевина (ммоль/л)	
1	- Креатинин (ммоль/л)	
1	- Глюкоза (ммоль/л)	
1	- Холестерин (ммоль/л)	
1	- Билирубин общий (ммоль/л)	
1	- Триглицериды (ммоль/л)	
1	- Билирубин прямой (ммоль/л)	
1	- Фосфатаза щелочная (Ед/л)	
1	- Амилаза общая (Ед/л)	6
1	Заключение	лалалаллала

Группа:

Легенда

Нормы

Показать все нормы

Наименование	Норма
Общие	0 - 100

Доп. параметры

Биоматериал: Сыворотка крови (Образец)

Интерпретация: ... Q X

Анализатор: Antos-2010

Выполнил: ... Q X

Дата выполнения: . . :

Реагент: ... Q X Серия ... Q X

Опросник

Вопрос	Ответ
Пол	Муж.
Возраст	3 г.

Комментарий лаборатории

Импорт | Печать | Подписать и закрыть | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Но если нет возможности импортировать результаты, то заполните поле “Анализатор” вручную.

После подписания свода результатов исследований, в результате во вкладке “Реагенты” автоматически подтянутся реагенты, которые использовались.

Документ: Результат исследований №229 от 23.09.2026

История

Изменения результатов

Подпись: Администратор

Автор: Администратор

Файлы

Расчитать результат

ГЕСТИКОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ, 09.08.2023, 3 года; Амбул. случай №45 (10.09.2026); ОМС
Ставропольский край, Ставрополь г, Васильева ул, д. 1, кор. 1, кв. 1

Номер: 229 от 23.09.2026 14:25:06

Направление: Направление на исследования №677 от 23.09.2026

Биоматериал: Сыворотка крови (Образец)

Выполнил: Администратор (Медицина ИТ)

Дата выполнения исследования: 23.09.2026 14:25:41

☐ Результат из другой организации:

Дата окончания исследования: 23.09.2026 14:48:19

Анализ: Биохимический анализ крови

Необходимые исследования

Дополнительно

Результат (текст)

Заключение

Услуги

Реагенты

Анализатор	Реагент	Ед. измерения	Расход на исследование
Antos-2010	Торасемид-СЗ табл.№30	10*9g/l	23

Печать

Подписать и закрыть

Сохранить и закрыть

Сохранить

Закрыть

Отчет:

DAN.0124 "Отчёт о расходе хим. реактивов КДЛ по выполненным лаб. исследованиям"

Revision #2
Created 23 September 2026 12:32:13 by Подопригора Дарья
Updated 23 September 2026 12:41:46 by Подопригора Дарья
1 4