


Обновление LabKSAMU при переходе на RDB

Для обновления LabKSAMU при переходе на RDB необходимо:

1. Подготовка файлов


Скачайте файлы (`fbclient.dll`, `instclient`, `msvcp140.dll`, `vcruntime140.dll`), прикрепленные к данной инструкции в удобное место на компьютере, где установлена LabKSAMU.

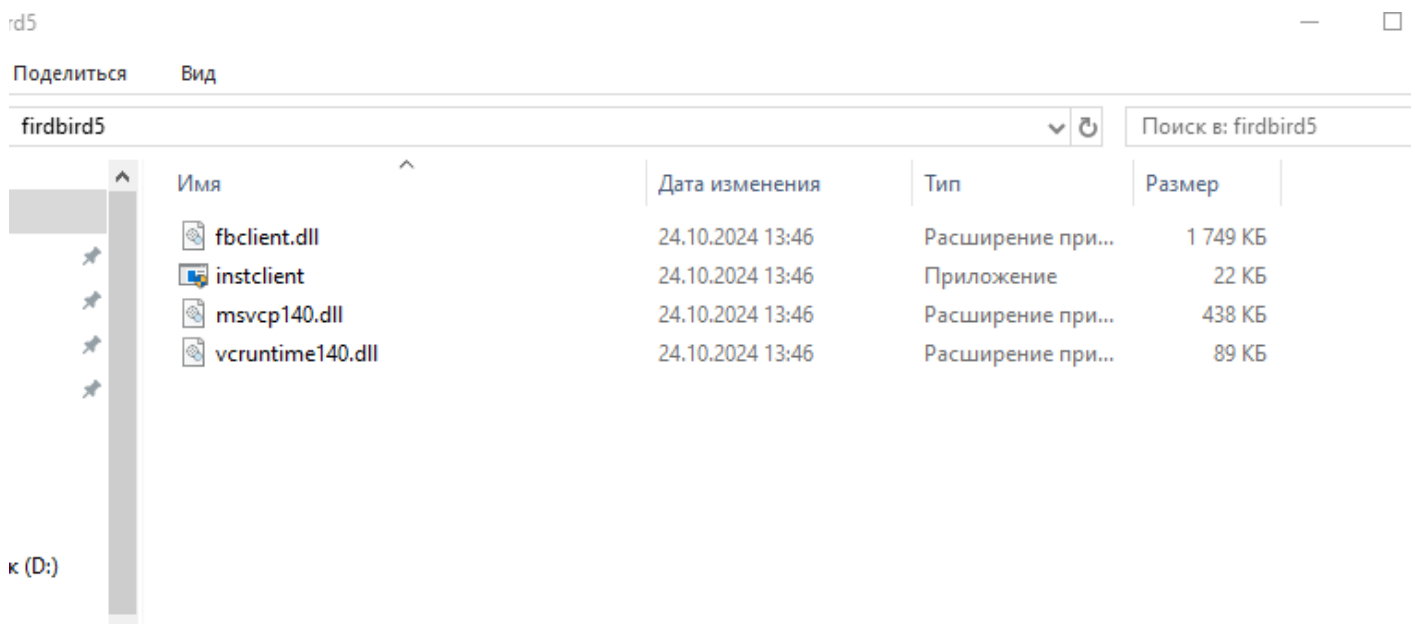


2. Завершение работы LabKSAMU.

Перед обновлением необходимо полностью закрыть приложение:

1. Найдите иконку **LabKSAMU** в системном трее (в нижнем правом углу экрана, рядом с часами).

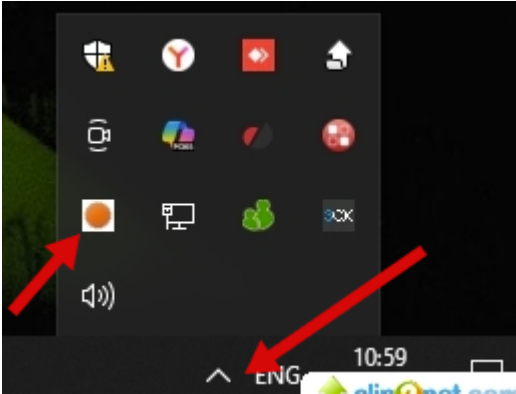

2. Нажмите на иконку правой кнопкой мыши и выберите пункт **«Закреть менеджер оборудования»**.

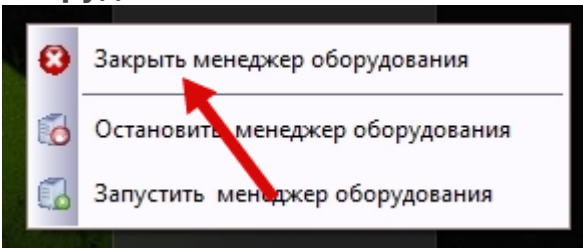


3. Если запущено несколько экземпляров программы, повторите это действие для каждого из них (либо они закроются автоматически после первого закрытия).

3. Перейдите в папку LabKSAMU


Если вы не знаете точное расположение папки, воспользуйтесь следующим способом:

1. Нажмите комбинацию клавиш **Win + R**.
2. В появившемся окне «Выполнить» введите команду `shell:startup` и нажмите **Enter**.

Откроется папка «Автозагрузка».

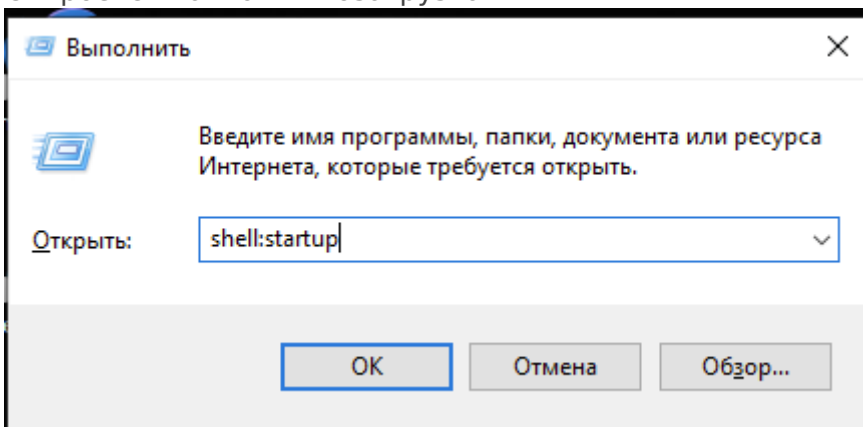


3. Найдите ярлык **LabKSAMU**, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт **«Расположение файла»**. Откроется папка "LabKSAMU".

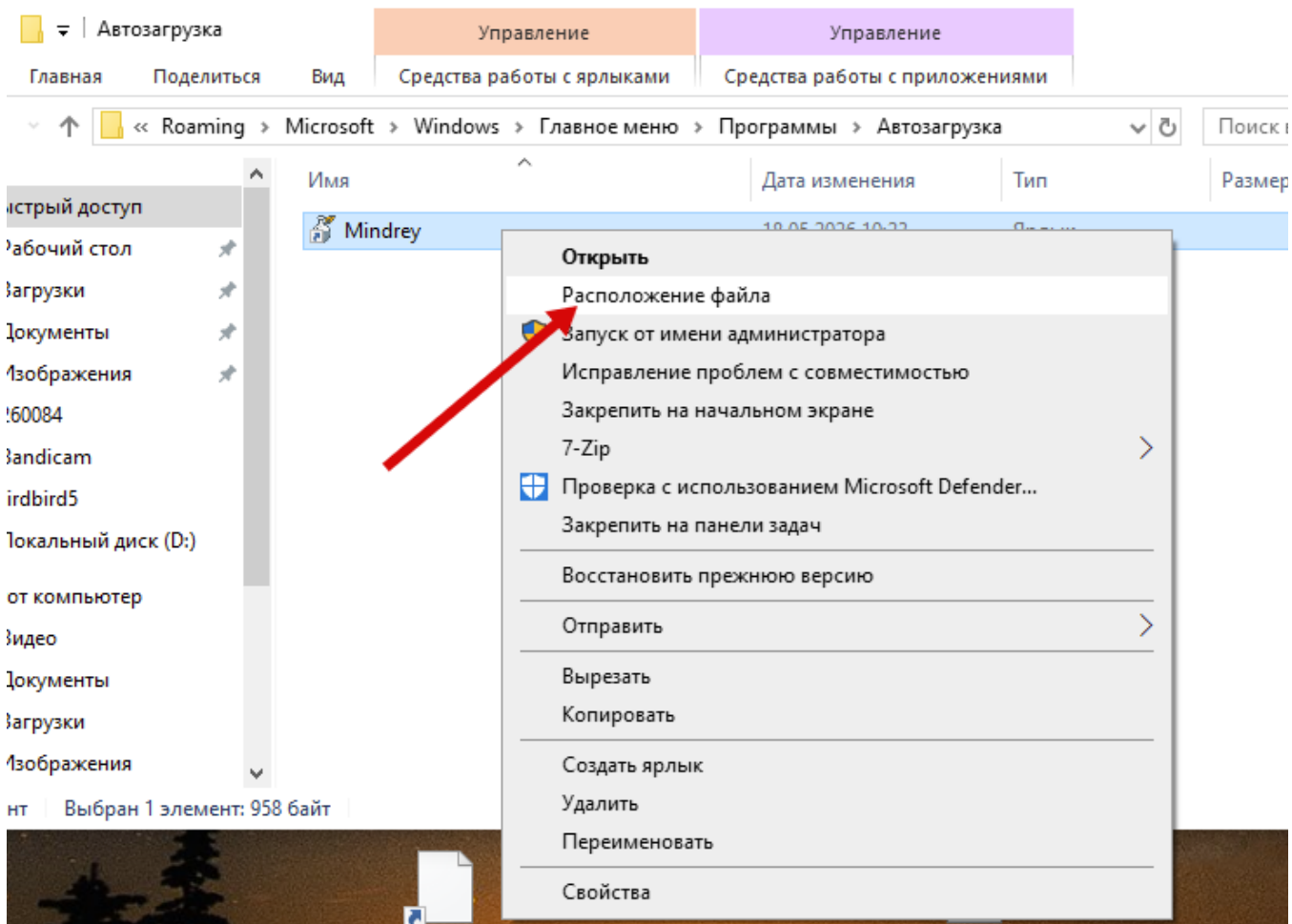

4. Замена файлов

Скопируйте скачанные ранее файлы (`fbclient.dll` , `instclient` , `msvcpr140.dll` , `vcruntime140.dll`) в открывшуюся папку LabKSAMU. При появлении системного запроса выберите «**Заменить файлы в папке назначения**».

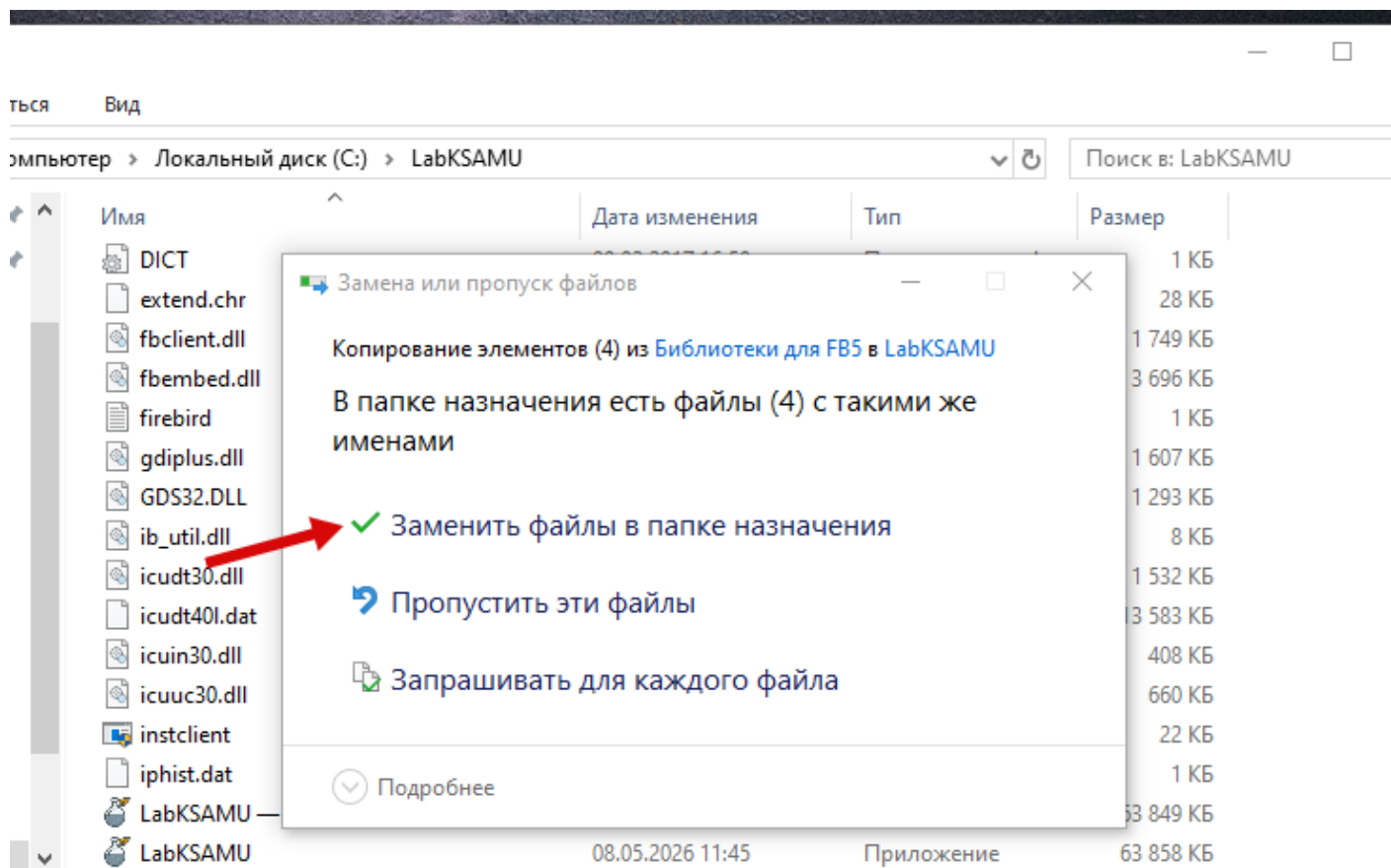

5. Запуск программы

1. Вернитесь в папку «Автозагрузка» (которую открывали в пункте 3).
2. Запустите программу, дважды кликнув левой кнопкой мыши по ярлыку (или ярлыкам) LabKSAMU.

Также могут быть проблемы с библиотеками Windows. Более подробно проблема описана в письме №255 от 30.05.2024 г. (Письмо прикреплено к инструкции)

Revision #2

Created 18 May 2026 07:12:31 by Подопригора Дарья

Updated 18 May 2026 08:16:04 by Подопригора Дарья