

# Работа процедур. мед. сестры в журнале взятия биоматериала.

Перейдите в журнал “Журнал взятия биоматериала” (Документы – Лаборатория – Журнал взятия биоматериала). (Рисунок 1)

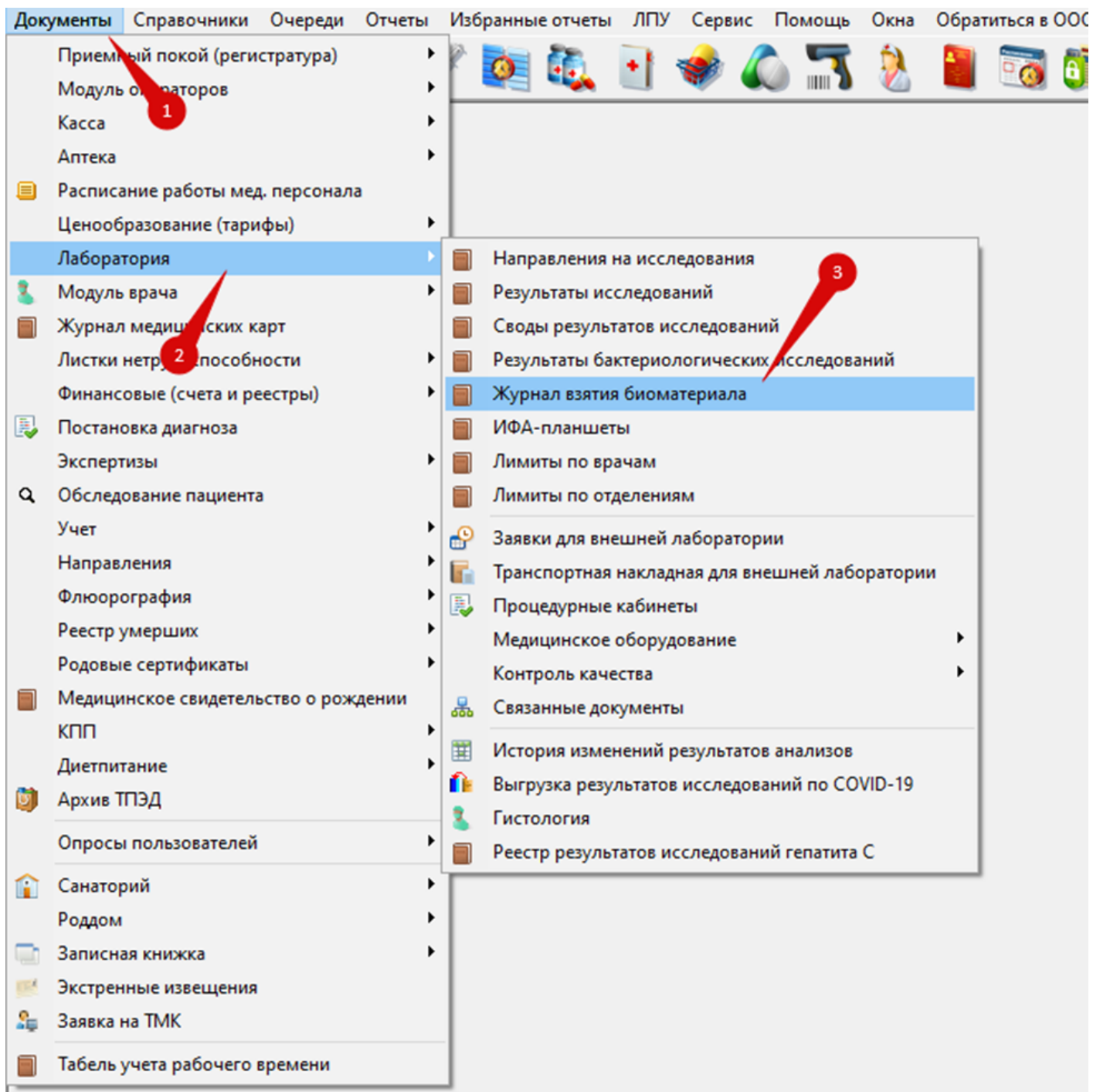


Рисунок 1

В данном журнале найдите нужную вам заявку. Для упрощения поиска, воспользуйтесь фильтрами. Также заявку можно найти при сканировании штрихкода в направлении. (Рисунок 2)

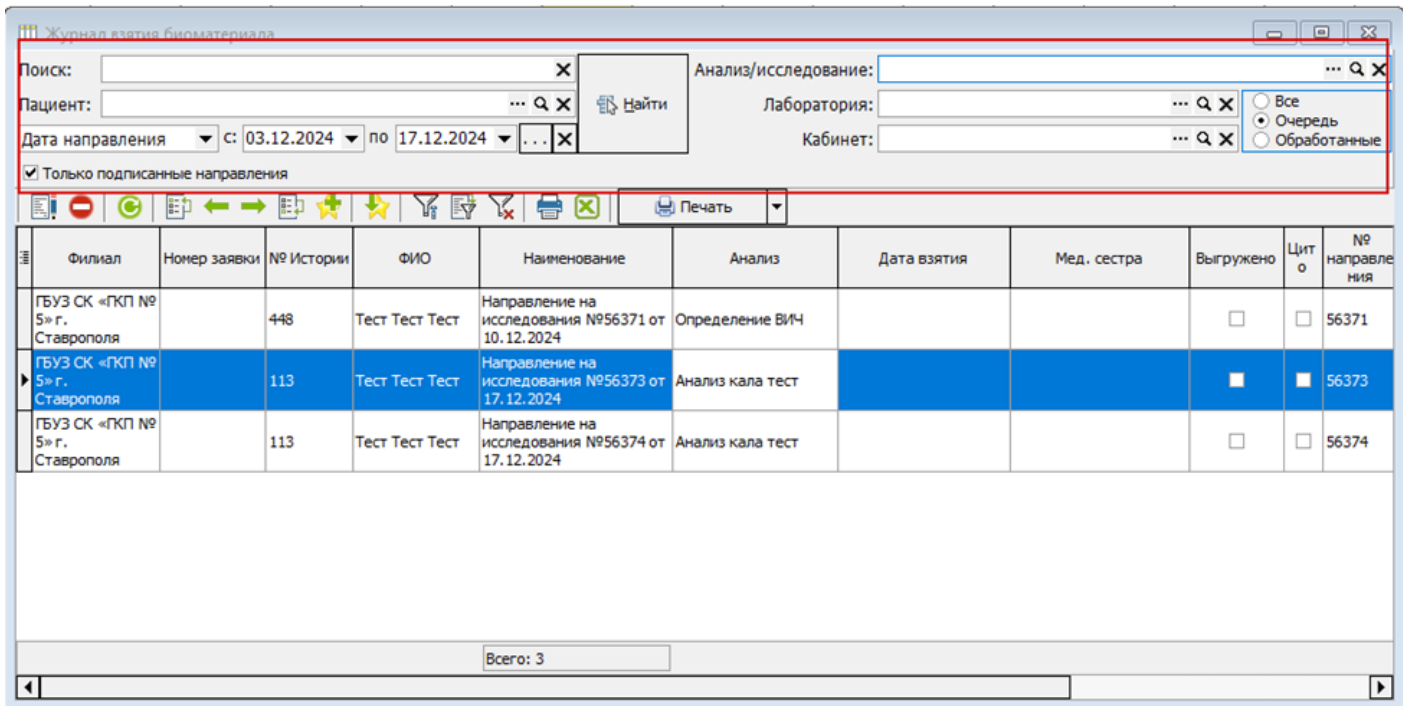


Рисунок 2

Нажмите на заявку два раза ЛКМ. (Рисунок 3)

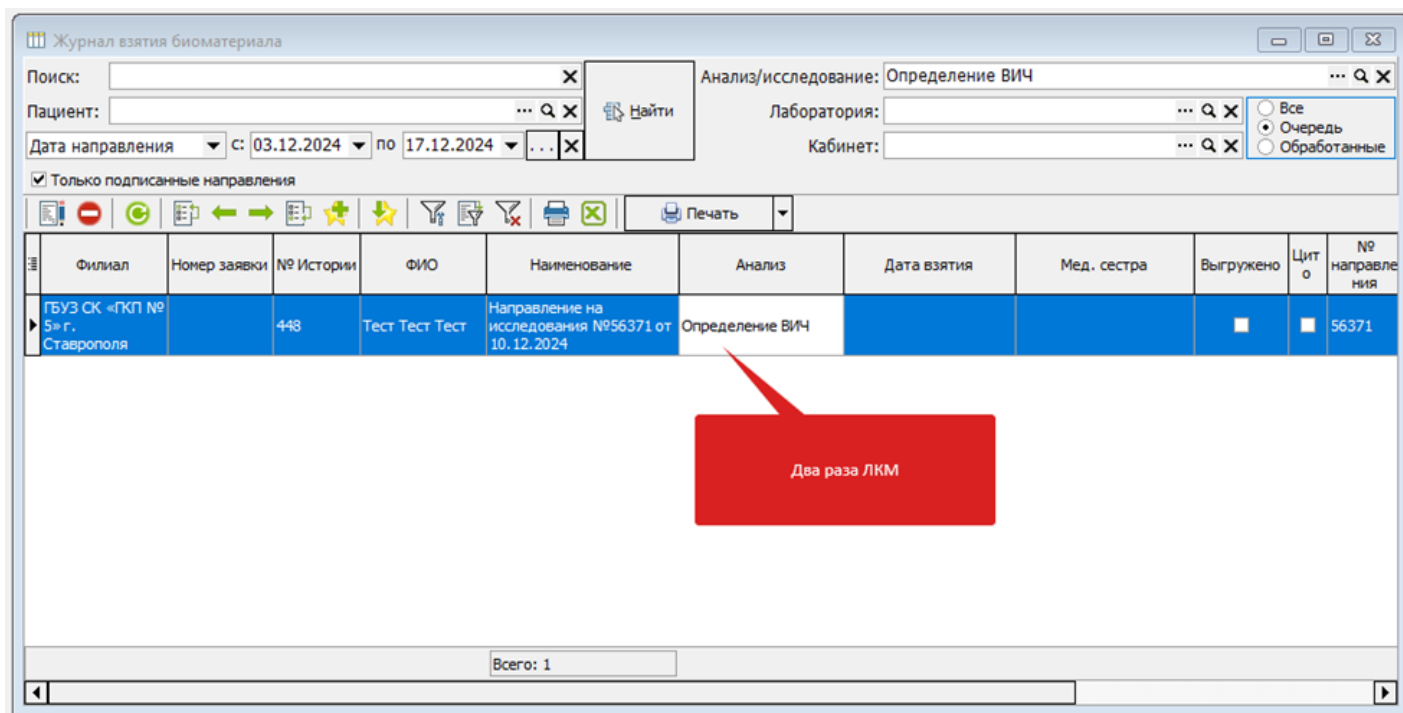


Рисунок 3

Чтобы присвоить штрих-код к заявке, нажмите на кнопку “Штрих-код”. (Рисунок 4)

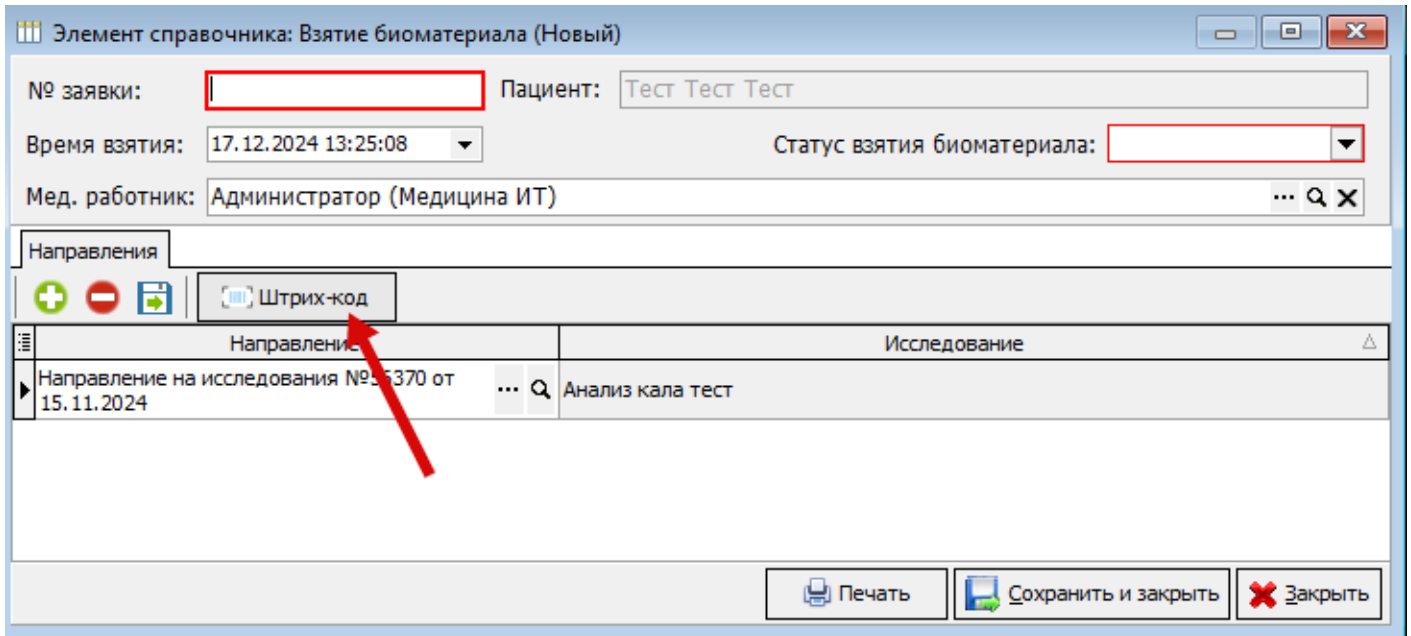


Рисунок 4

Нажмите на пустое поле “Штрих-код” и отсканируйте сканером штрих-код с пробирки. (Рисунок 5)

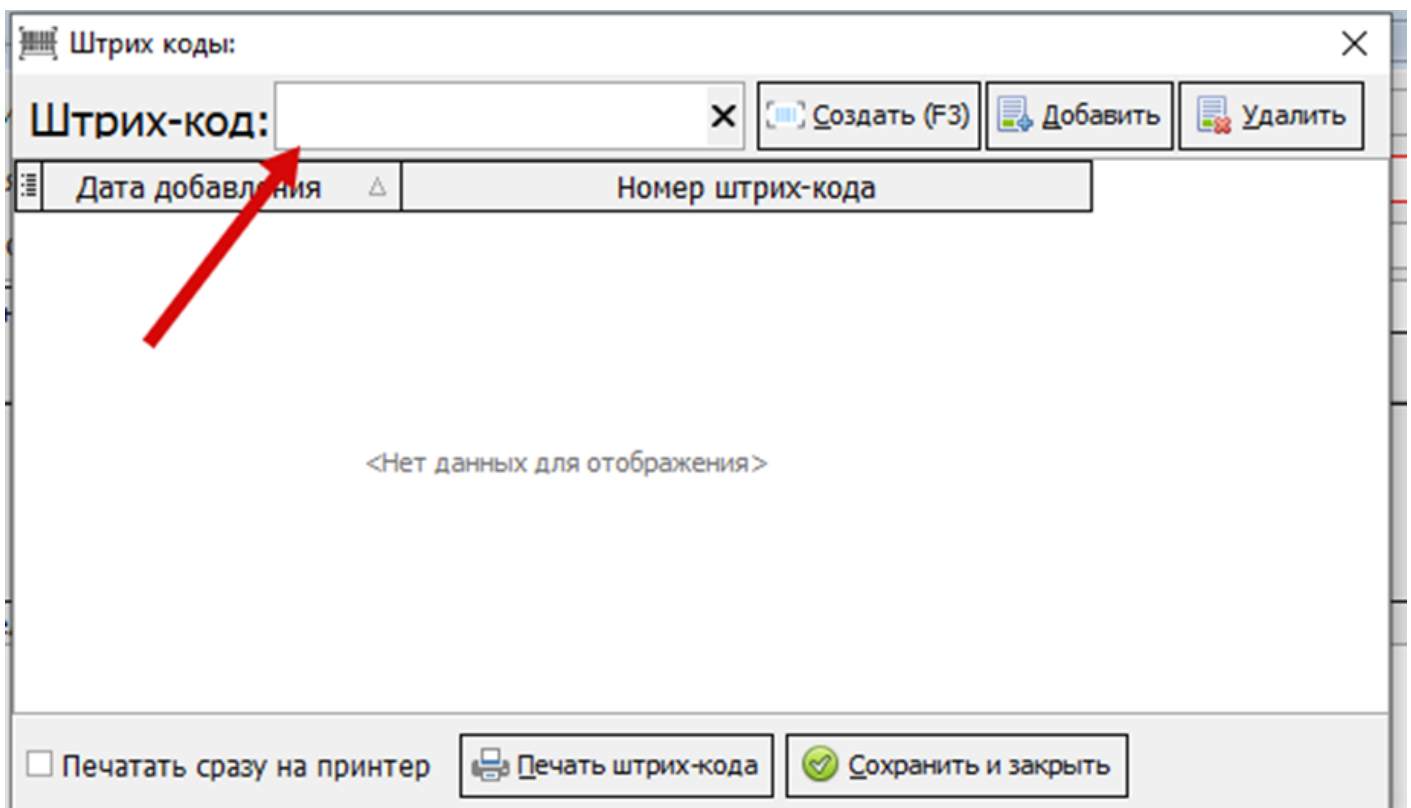


Рисунок 5

После сканирования, штрих-код автоматически добавляется. (Рисунок 6)

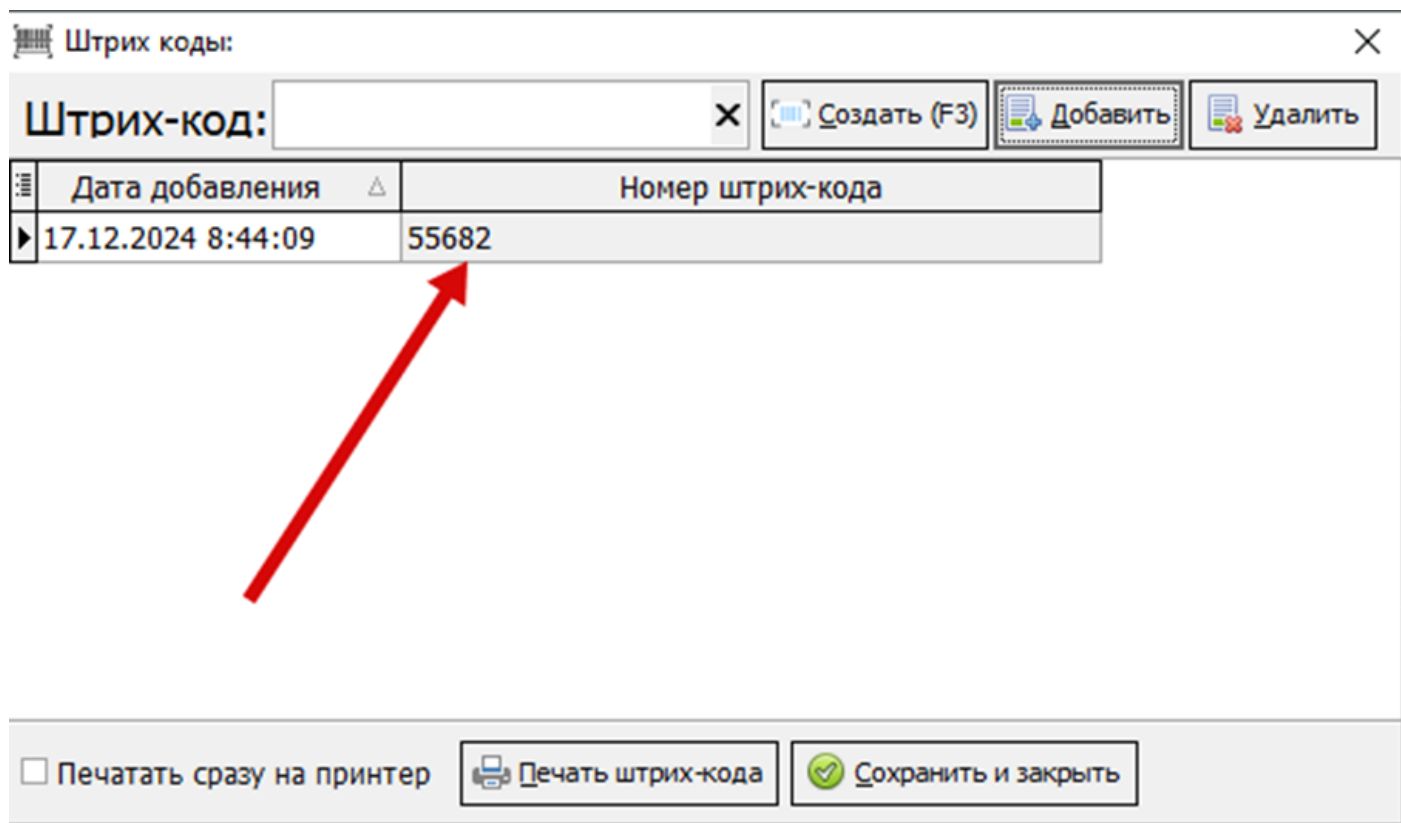


Рисунок 6

При необходимости, штрих-код можно присваивать вручную.

Введите номер штрих-кода в поле "Штрих-код" и нажмите кнопку "Добавить". (Рисунок 7)

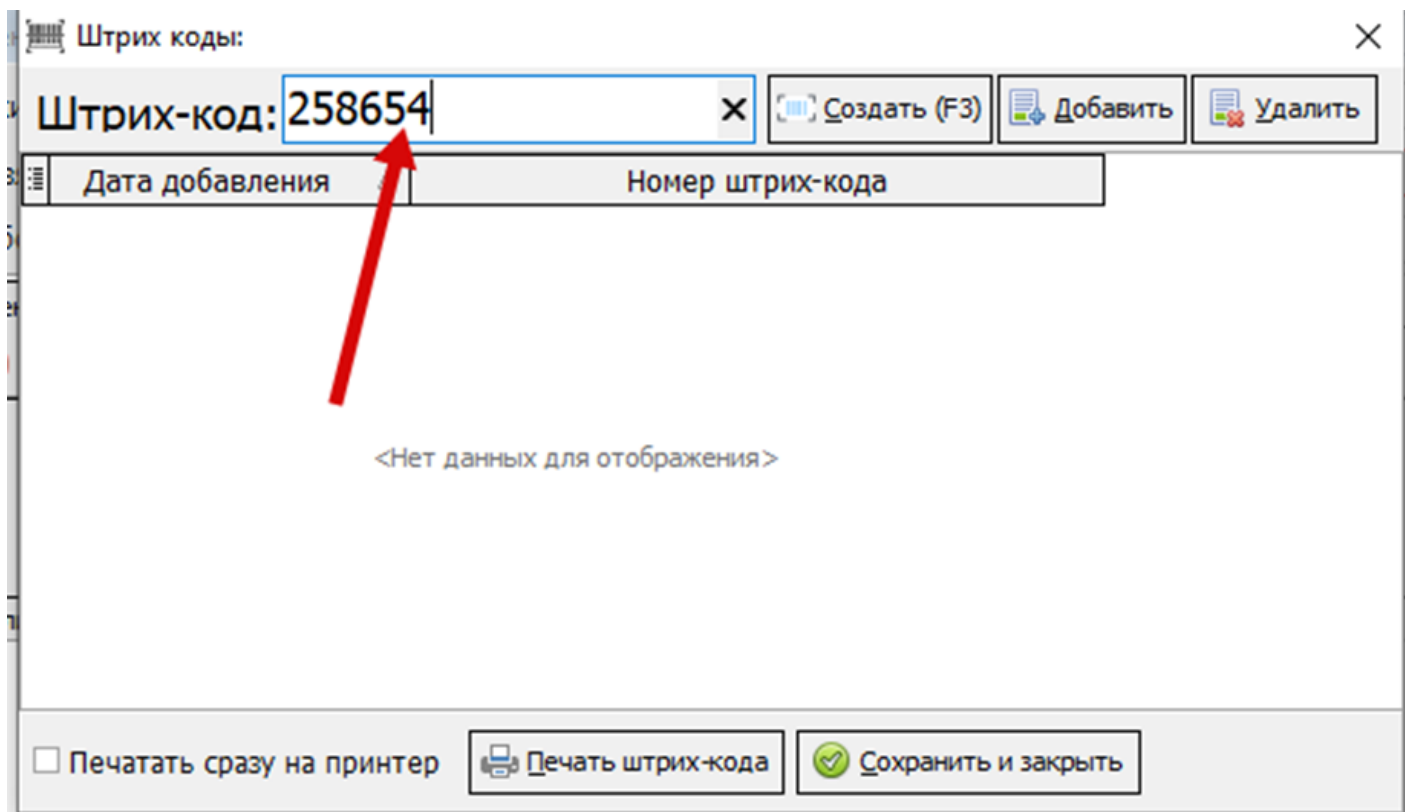


Рисунок 7

После добавления штрих-кода, нажмите кнопку “Сохранить и закрыть”. (Рисунок 8)

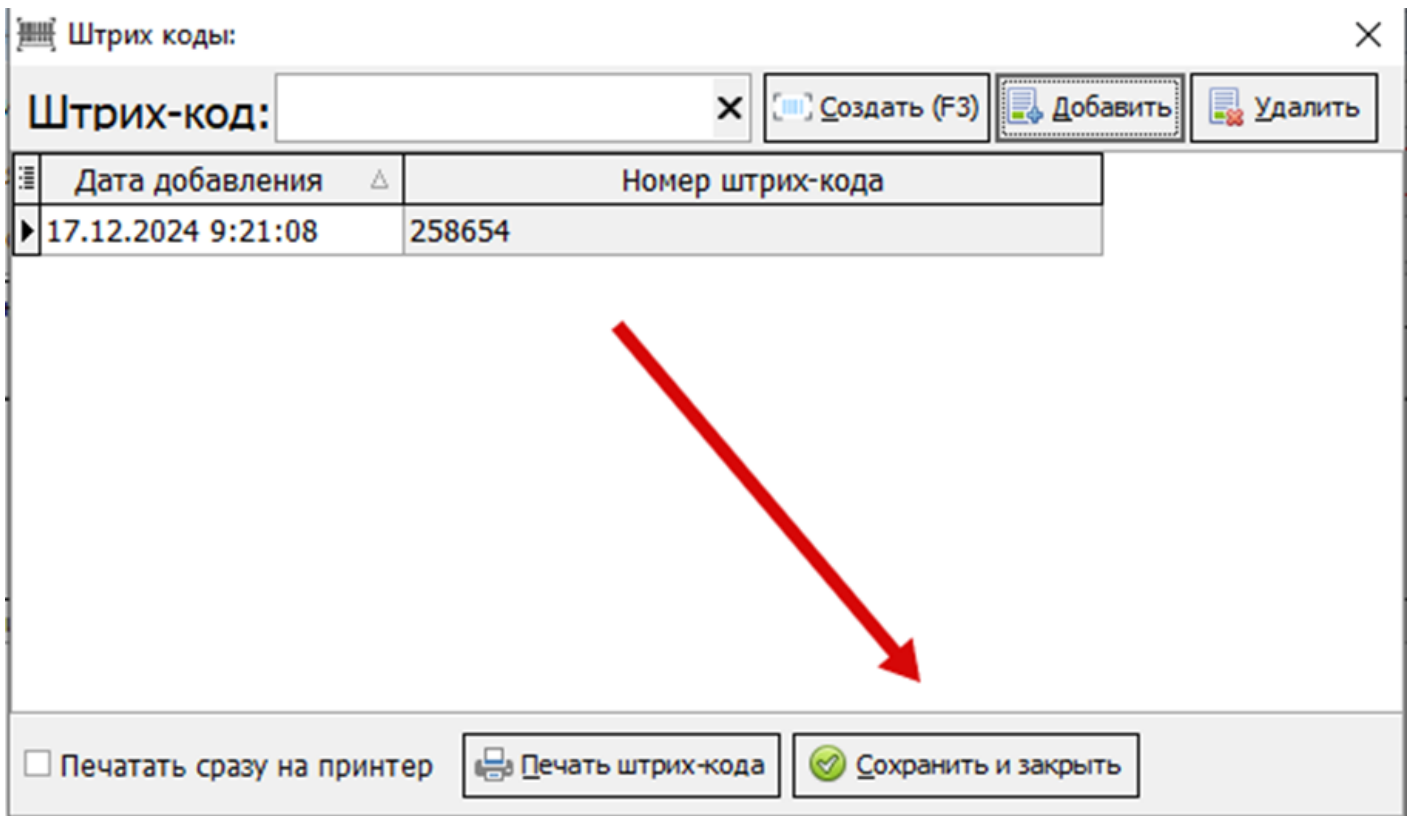


Рисунок 8

Штрих-код автоматически привязывается к заявке и направлению.

Также код штрих-кода автоматически привязывается к номеру заявки. (Рисунок 9)

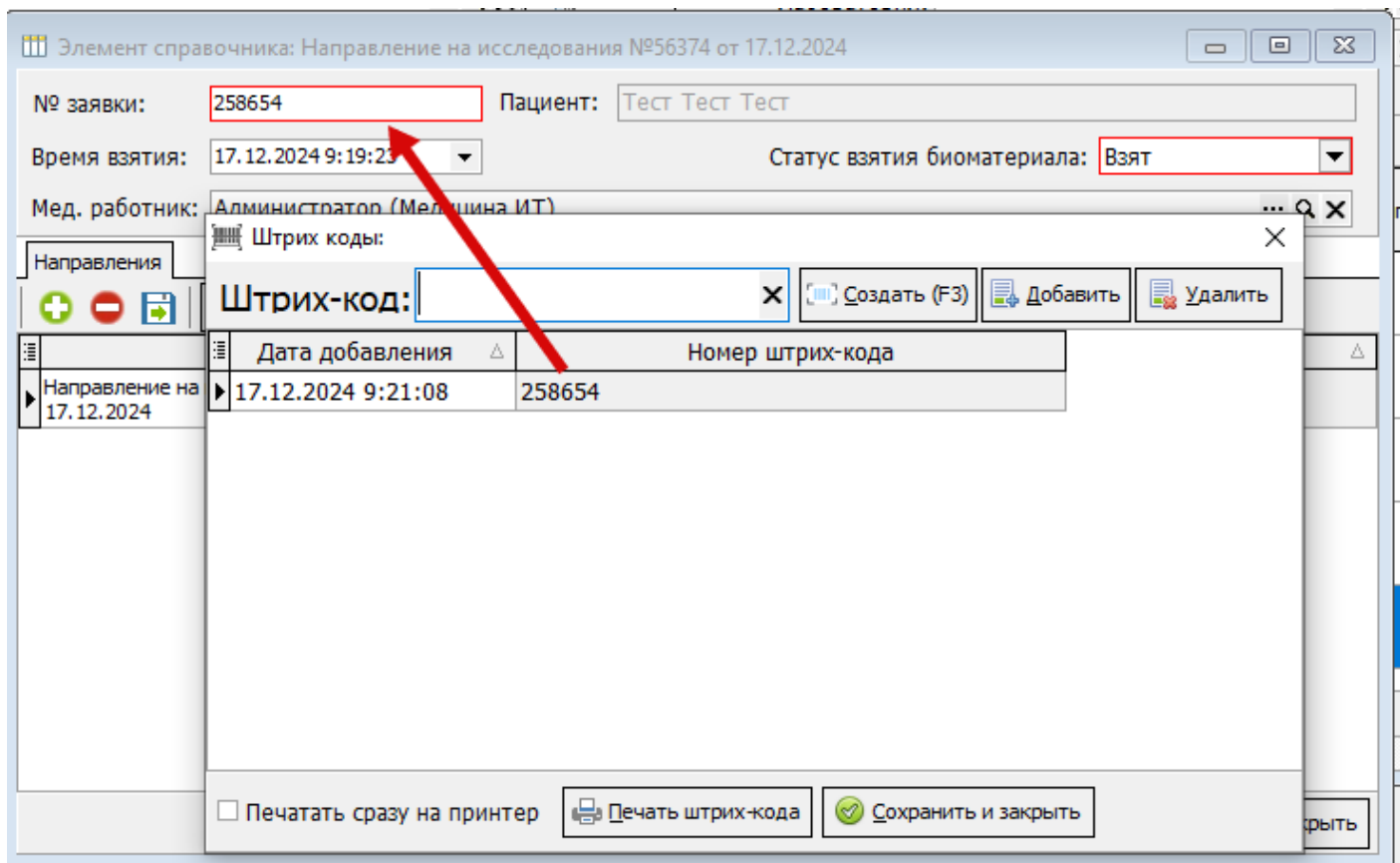


Рисунок 9

Далее сохраните и закройте заявку. (Рисунок 10)

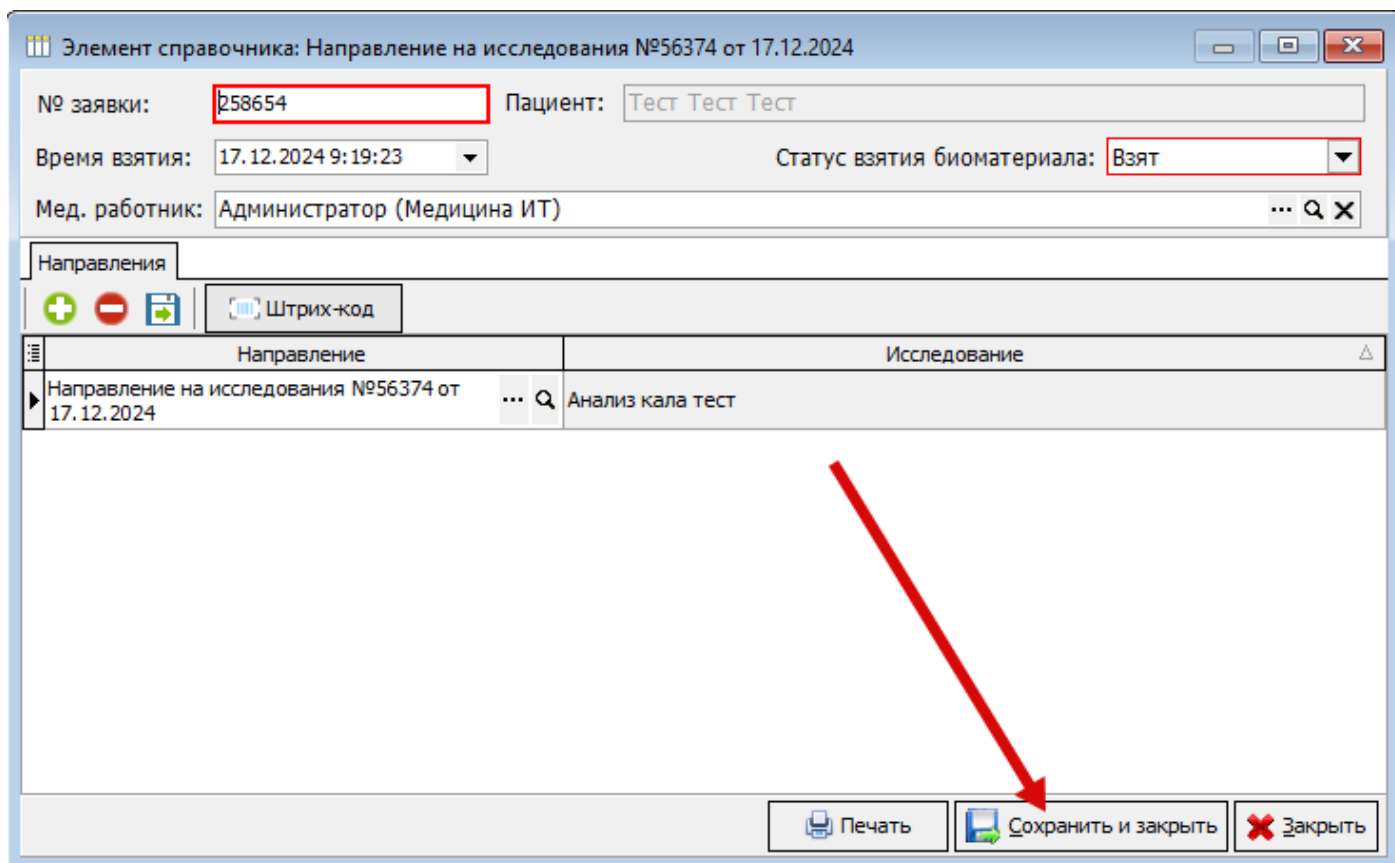


Рисунок 10

Статус взятия биоматериала “Взят” присваивается автоматически после сохранения заявки. (Рисунок 11)

Журнал взятия биоматериала

Поиск:

Пациент:  Найти

Дата направления с: 17.12.2024 по 17.12.2024

Анализ/исследование:

Лаборатория:

Кабинет:

Только подписанные направления

Печать

№	Наименование	Анализ	Дата взятия	Мед. сестра	Выгружено	Цит о	№ направле ния	Дата создания направления	Направил	Статус взятия биоматериала
Тест	Направление на исследования №56373 от 17.12.2024	Анализ кала тест			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56373	17.12.2024 8:30:55	Администратор (Медицина ИТ)	
Тест	Направление на исследования №56374 от 17.12.2024	Анализ кала тест	17.12.2024 9:19:23	Администратор (Медицина ИТ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56374	17.12.2024 8:33:28	Администратор (Медицина ИТ)	Взят

Всего: 2

Рисунок 11

Чтобы поставить вручную статус взятия биоматериала, необходимо в заявке в выпадающем списке выбрать статус. (Рисунок 12)

Элемент справочника: Направление на исследования №56374 от 17.12.2024

№ заявки: 258654 Пациент: Тест Тест Тест

Время взятия: 17.12.2024 9:19:23

Мед. работник: Администратор (Медицина ИТ)

Статус взятия биоматериала: **Взят**

Направления

Штрих-код

Направление	Исследование
Направление на исследования №56374 от 17.12.2024	Анализ кала тест

Печать Сохранить и закрыть Закрыть

Рисунок 12

Чтобы просмотреть и/или распечатать направление, в заявке нажмите на лупу в столбце “Направление”. (Рисунок 13)

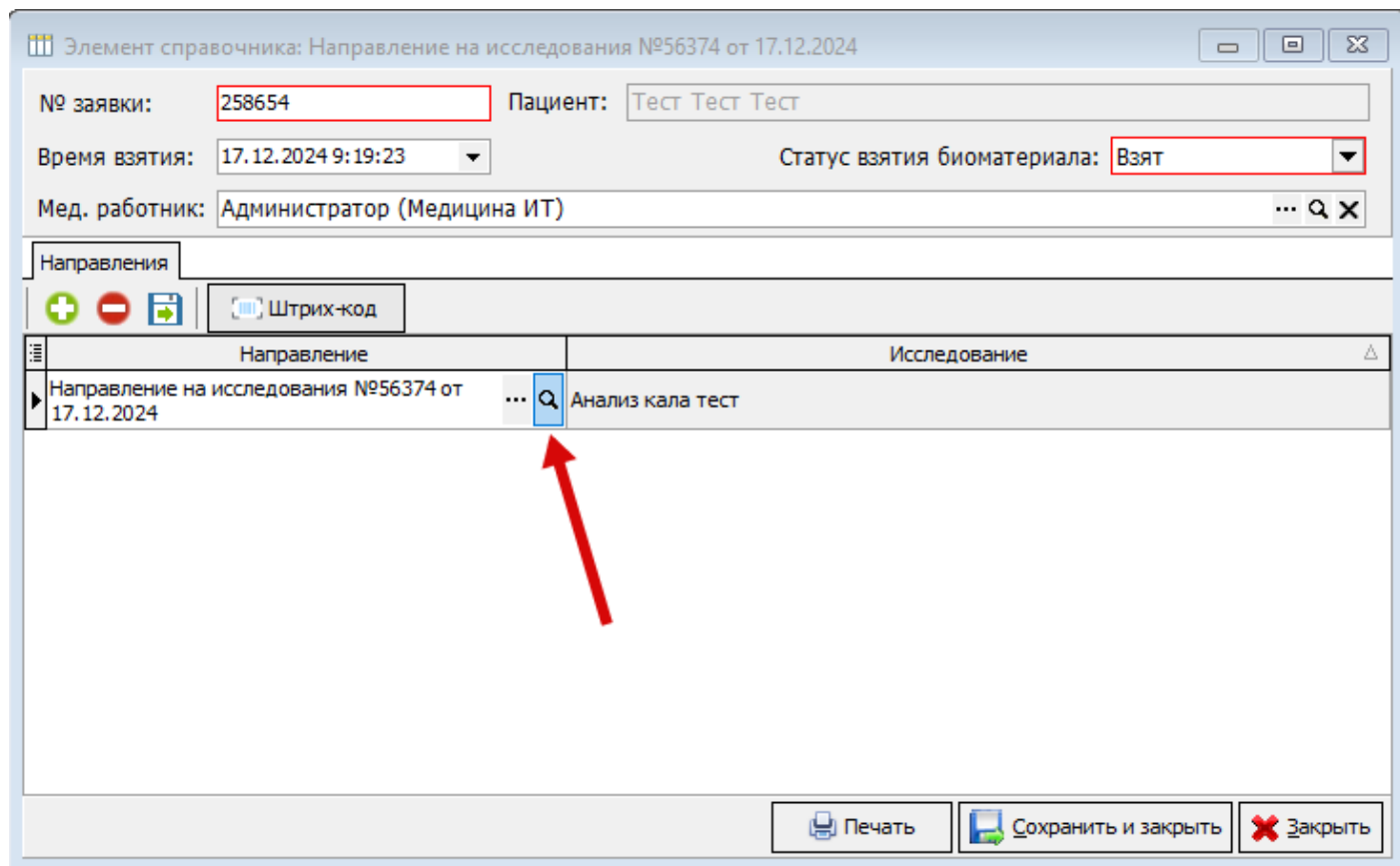


Рисунок 13

Документ: Направление на исследования №36336 от 28.11.2024

История | Подпись: Администратор | Автор: Администратор | Штрих-код

Номер: 36336

От: 28.11.2024 15:36:34 на 28.11.2024 15:37:27

Направил: Администратор (Медицина ИТ)

Отделение: Амбулаторно-поликлиническое отделение

Палата:

Вид оплаты: ОМС

Лаборатория: Биохимическая лаборатория

Цель исследования: Не выбрано

Биоматериал: Плазма крови

Дата, время взятия:

Взял биоматериал:

В другую организацию:  
 Направление из другой организации

Анализ: Коагулограмма

Cito!

Необходимые исследования | Расписание исследований | Опросник | Дополнительная информация

Исследовать	Исследование/Параметр
<input checked="" type="checkbox"/>	Коагулограмма
<input type="checkbox"/>	Коагулограмма
<input type="checkbox"/>	Примечание

Доп. инф.: Создано в "Мастере анализов" из "Амбулаторный талон №855... от 26.08.2024"

[Подробная инструкция по настройке штрих-кодов и их использования.](#)

Revision #5

Created 17 December 2024 10:00:45 by Подопригора Дарья

Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон

1 12