

# Срок актуальности направления.

Настройка срока актуальности направлений позволяет установить «срок жизни направления», по истечению которого, при отсутствии результата, у направления появится отметка «Анализ не выполнен в назначенную дату». Помимо этого, в настройках анализа можно задать правило, которое будет обрабатывать при повторном назначении анализа, если уже есть направление на этот анализ и срок актуальности его ещё не истёк (рисунок 6). Программа может игнорировать повторные назначения, уведомлять пользователя или запрещать совершать повторные назначения.

В КСАМУ существует два способа как установить срок актуальности направлений. Первый способ: настройка актуальности направлений всем анализам.

1. Необходимо перейти в параметры ЛПУ(“ЛПУ” – “Параметры”). (Рисунок 1)

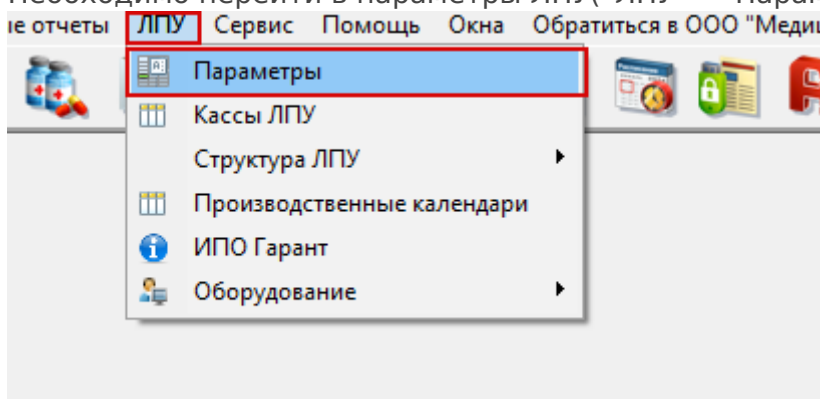


Рисунок 1.

2. В параметрах ЛПУ перейдите во вкладку “Лис (Лаборатория)”. Найдите строку “Срок актуальности направления на исследования”. Укажите количество дней актуальности направлений на исследования. (Рисунок 2)

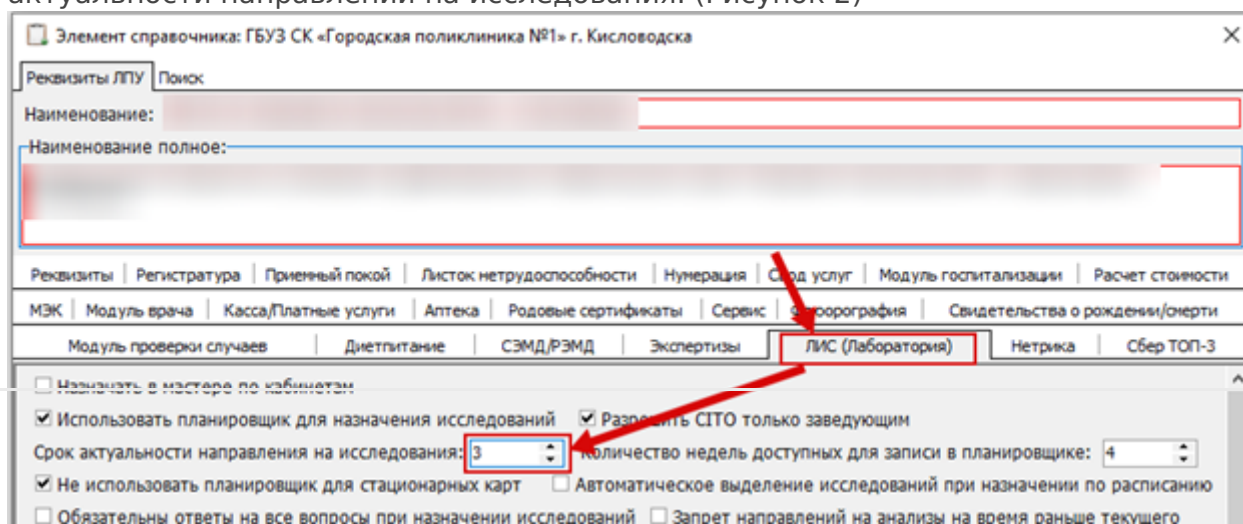


Рисунок 2.

3. Сохраните и закройте параметры ЛПУ. (Рисунок 3)

Элемент справочника: [X]

Реквизиты ЛПУ Поиск

Наименование: [ ]

Наименование полное: [ ]

Реквизиты | Регистратура | Приемный покой | Листок нетрудоспособности | Нумерация | Свод услуг | Модуль госпитализации | Расчет стоимости

МЭК | Модуль врача | Касса/Платные услуги | Аптека | Родовые сертификаты | Сервис | Флюорография | Свидетельства о рождении/смерти

Модуль проверки случаев | Диетпитание | СЭМД/РЭМД | Экспертизы | ЛИС (Лаборатория) | Нетрика | Сброс ТОП-3

☐ Назначать в мастере по кабинетам

☐ Использовать планировщик для назначения исследований ☐ Разрешить СИТО только заведующим

Срок актуальности направления на исследования: 0 Количество недель доступных для записи в планировщике: 1

☐ Не использовать планировщик для стационарных карт ☐ Автоматическое выделение исследований при назначении по расписанию

☐ Обязательны ответы на все вопросы при назначении исследований ☐ Запрет направлений на анализы на время раньше текущего

☐ Использовать текущую дату в мастере анализов для назначений ☐ Подписывать результаты из ИФА-планшета

☐ Выгружать направления в ЦОД только после взятия БМ ☐ Разрешить создание направлений на анализы лабораторией

☐ Фильтровать анализы в мастере анализов по типу оплаты в услугах ☐ Автоматическое создание направлений на внешние услуги

☐ Обязательный диагноз при назначении анализов ☐ Разрешить ручное создание направлений

Код печатной формы для печати штрих кодов (по умолчанию): [ ] [Выбрать]

Код печатной формы для печати штрих кода с направления: [ ] [Выбрать]

Наименование организации на английском языке: [ ] [Транслит]

Адрес организации на английском языке: [ ] [Транслит]

Значения по умолчанию для случаев при Направлении из другой МО

Диагноз: [ ] ... Q X

Врач: [ ] ... Q X

Особый случай: [ ] ... Q X

Результат обращения: [ ] ... Q X

[Сохранить и закрыть] [Сохранить] [Заккрыть]

Рисунок 3.

Второй способ. Настройка актуальности направлений у одного анализа.

1. Откройте справочник лабораторных исследований. ("Справочник" – "Лаборатория" – "Исследований" – "Исследования лаборатории"). (Рисунок 4)

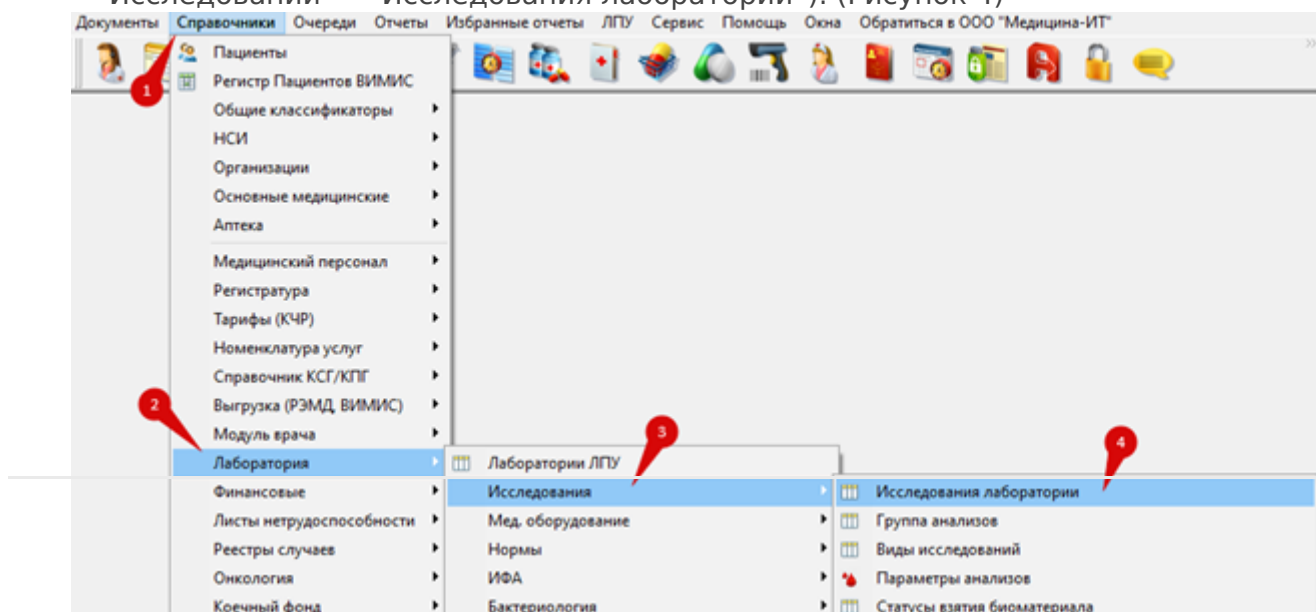


Рисунок 4.

- Найдите нужный анализ в справочнике лабораторных исследований и откройте для редактирования двойным кликом левой кнопкой мыши. (Рисунок 5)

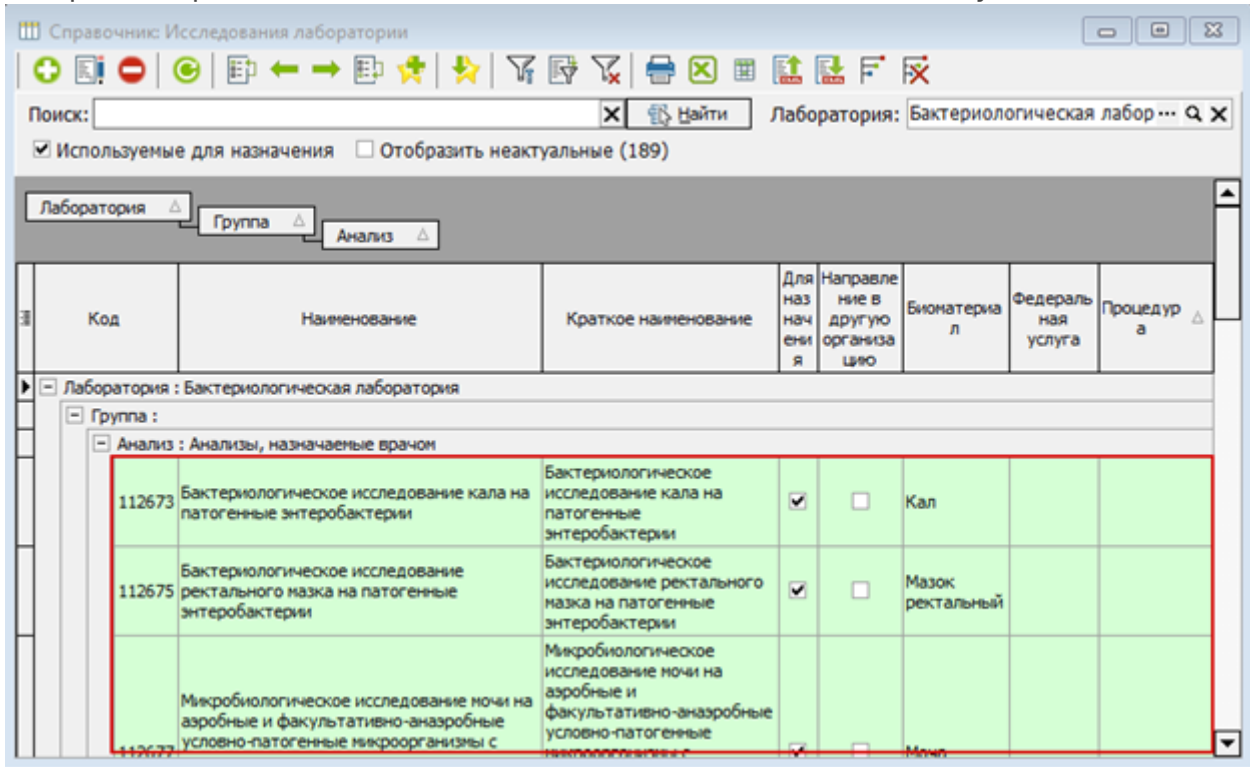
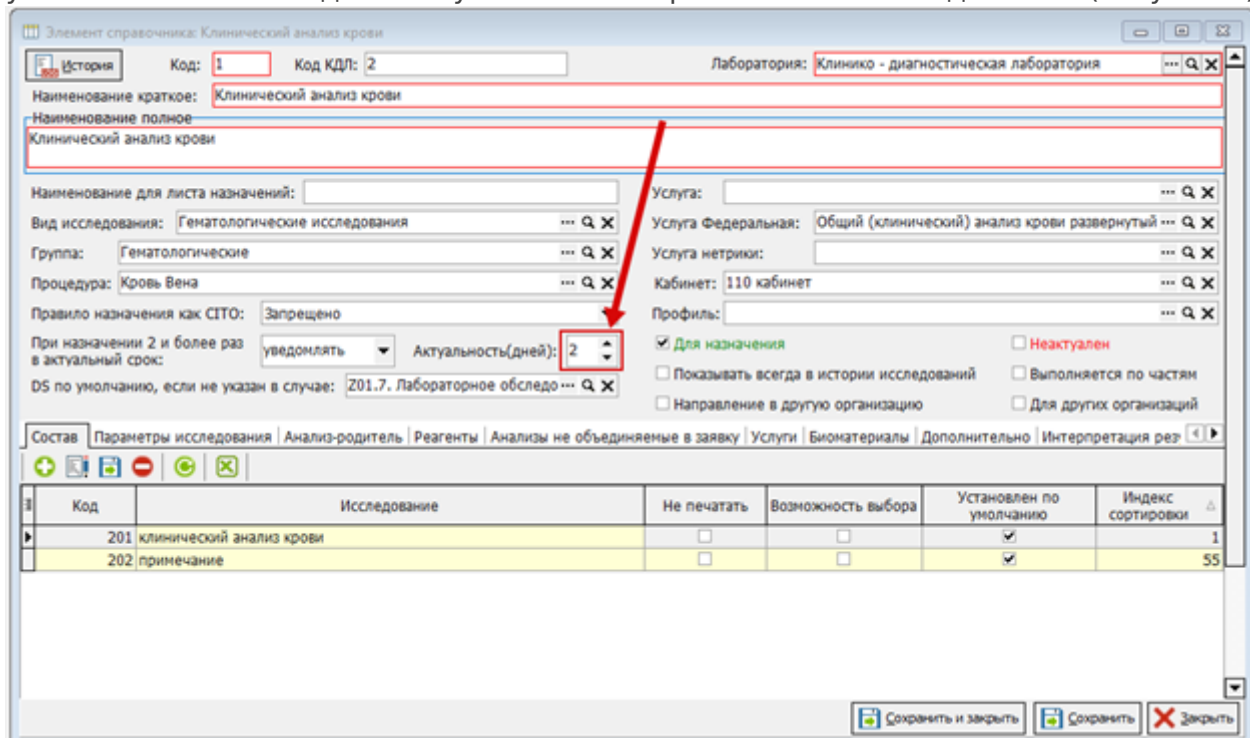


Рисунок 5.

- В элементе справочника найдите строку "Актуальность (дней)". В данной строке укажите количество дней актуальности направления на исследование. (Рисунок 6)



*Рисунок 6.*

Если актуальность дней стоит и в анализе, и в параметрах ЛПУ, то в направление будет подтягиваться актуальность дней с анализа.

---

Revision #5

Created 6 June 2024 12:14:52 by Подопригора Дарья

Updated 11 July 2024 14:41:39 by Коломейцев Антон

1 4