

Статусы выдачи результатов лабораторных исследований

Статусы выдачи результатов используются для фиксирования информации о том, что пациент получил свой результат или был уведомлен о его готовности. На данный момент установка статусов выдачи работает только в ручном режиме.

Пользователь, который будет просматривать, добавлять и редактировать статусы лабораторных исследований, должен иметь роль с правами доступа для объекта REG_ANALYSIS_OUTPUT_NOTIFY (рисунок 1)

Доступ к объектам БД	Доступ к классам	Объект	Добавление	Редактирование	Просмотр	Удаление	Удалять чужое	Подписывание	Переподписывать чужое
		Регистр "Выдачи и/или оповещения результатов анализов"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Рисунок 1.

Для установки, просмотра, редактирования или удаления статуса лабораторного результата исследования необходимо: в форме «Результаты исследований» нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) на нужный документ результата (рисунок 2),

Документы: Результаты исследований

Печать выбранных

Поиск: Найти

Лаборатория: Все

История болезни: ... Q X

Филиал:

Пациент: ... Q X

Врач: ... Q X

За период с: 15.04.2022 по 16.04.2022

Анализ: ... Q X

Все
Подписанные
Не подписанные

Статус	Номер	Статус выдачи	Направление	Лаборатория	Дата результата	Анализ
Выполнены	2393		Направление на исследования №2670 от 15.04.2022	Клиническая лаборатория	15.04.2022 12:33:18	ОАК (Общий анализ крови)
Выполнены	2394		Направление на исследования №2669 от 15.04.2022	Клиническая лаборатория	15.04.2022 12:33:18	ОАК (Общий анализ крови)

ПКМ

Количество записей: 2

Рисунок 2.

после чего появится контекстное меню двумя возможными вариантами, это: «Установить статус» и «Просмотреть/Отменить статусы» (рисунок 3).

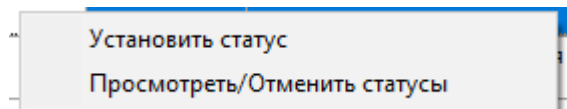


Рисунок 3.

Установить статус.

После выбора «Установить статус» откроется форма «Отметка об оповещении/выдаче результата» (рисунок 4).

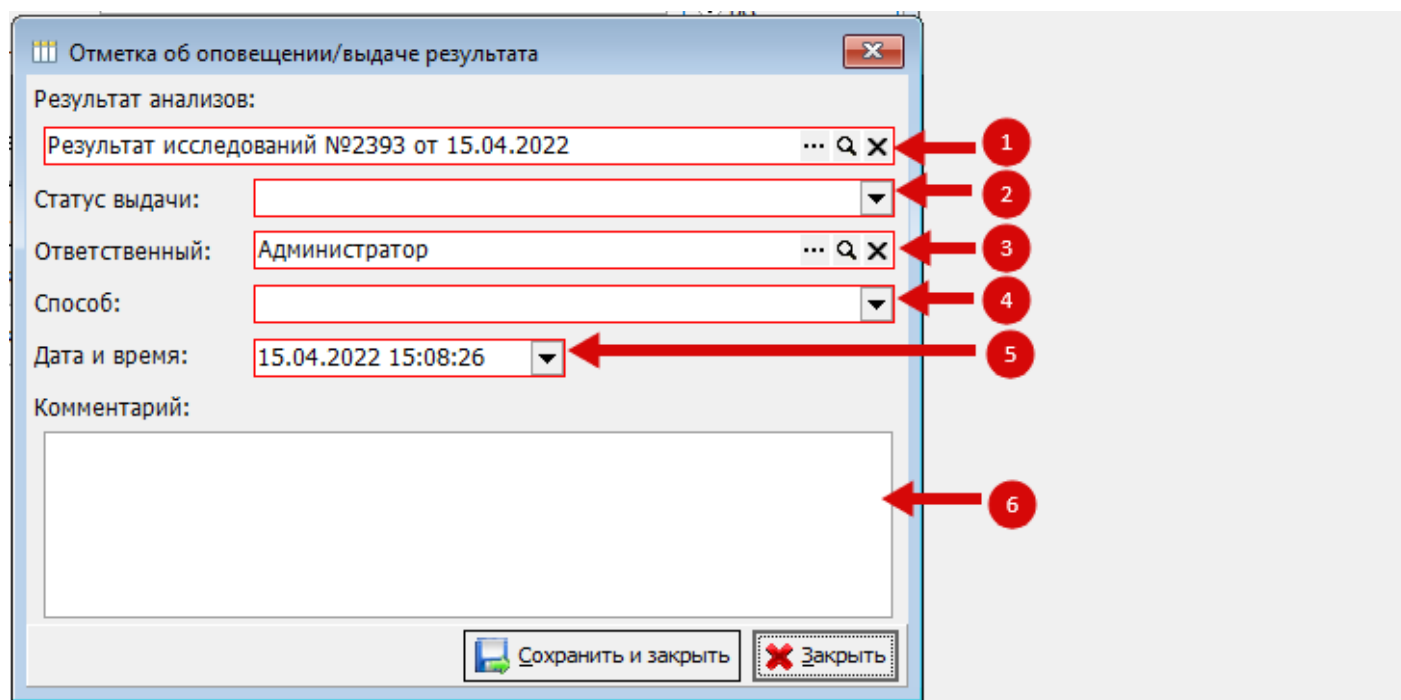
A screenshot of a software window titled "Отметка об оповещении/выдаче результата". The window contains several input fields and a text area. Six red arrows with numbers 1 through 6 point to the following elements: 1. A text field containing "Результат исследований №2393 от 15.04.2022". 2. A dropdown menu for "Статус выдачи:". 3. A text field containing "Администратор". 4. A dropdown menu for "Способ:". 5. A date and time field containing "15.04.2022 15:08:26". 6. A large empty text area for "Комментарий:". At the bottom of the window are two buttons: "Сохранить и закрыть" and "Закрыть".

Рисунок 4.

В данной форме есть 6 полей доступных для редактирования, 5 из которых обязательны к заполнению:

1. Результат анализов. Заполняется автоматически выбранным результатом анализа. Поле обязательное к заполнению.
2. Статус выдачи. Поле с выпадающим списком с двумя возможными вариантами заполнения (рисунок 5). Поле обязательное к заполнению.

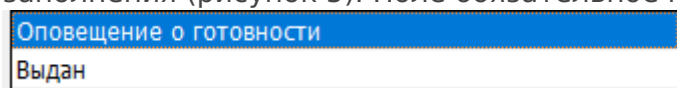


Рисунок 5.

3. Ответственный. Заполняется автоматически пользователем, авторизованным в КСАМУ. Поле обязательное к заполнению.
4. Способ. Если в поле «Статус выдачи» выбран вариант «Оповещение о готовности», то в поле «Способ» можно выбрать один из трех вариантов: «Электронная почта», «СМС» и «Телефонный звонок» (рисунок 6).

Статус выдачи: Оповещение о готовности

Ответственный: Администратор

Способ:

Дата и время: Электронная почта

Комментарий: СМС

Телефонный звонок

Рисунок 6.

Если в поле «Статус выдачи» выбран вариант «Выдан», то в поле «Способ» можно выбрать один из двух вариантов: «Лично» и «Электронная почта» (рисунок 7). Поле «Способ» обязательное к заполнению.

Статус выдачи: Выдан

Ответственный: Администратор

Способ:

Дата и время: Лично

Комментарий: Электронная почта

Рисунок 7.

5. Дата и время. Автоматически подставляется текущее время сервера. Поле обязательное к заполнению.
6. Комментарий. Поле произвольного ввода информации.

Визуализация статуса выдачи в журнале «Результаты исследований» происходит по следующему принципу: выводится информация из формы «Отметка об оповещении/ выдаче результата» из полей «Статус выдачи» + «Дата и время» (рисунок 8).

Статус	Номер	Статус выдачи	Направление
Выполнены	2393	Выдан (15.04.2022 15:36:06)	Направление на исследования №2670 от 15.04.2022
Выполнены	2394		Направление на исследования №2669 от 15.04.2022

Рисунок 8.

Просмотреть/отменить статусы


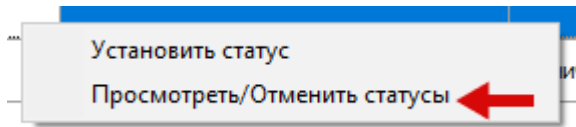


Рисунок 9.

Функционал формы позволяет отслеживать изменения в статусе лабораторного исследования (логирование) (рисунок 10).

При необходимости любую запись можно удалить. В журнале «Результаты исследований» в столбце «Статус выдачи» будет выводиться последняя запись.

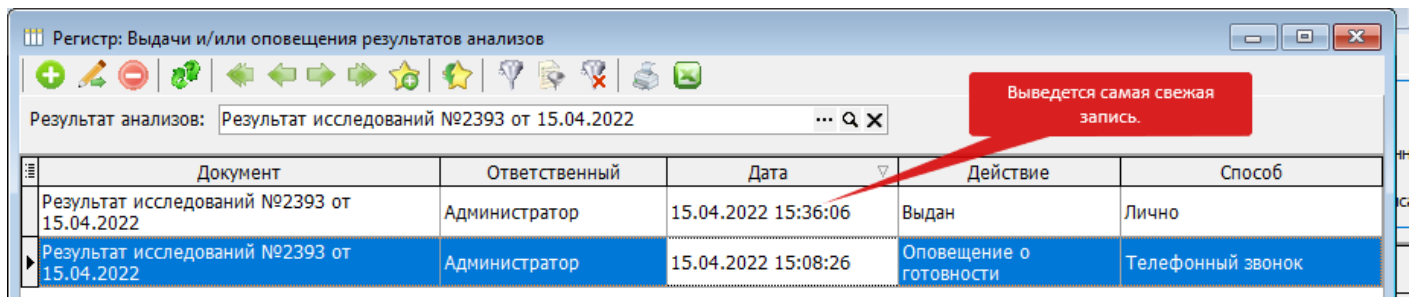

Регистр: Выдачи и/или оповещения результатов анализов

Результат анализов: Результат исследований №2393 от 15.04.2022

Документ	Ответственный	Дата	Действие	Способ
Результат исследований №2393 от 15.04.2022	Администратор	15.04.2022 15:36:06	Выдан	Лично
Результат исследований №2393 от 15.04.2022	Администратор	15.04.2022 15:08:26	Оповещение о готовности	Телефонный звонок

Рисунок 10.

Revision #3

Created 26 March 2024 09:17:46 by Коломейцев Антон

Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон