

Настройка автоматической отправки флюорографа

Для пересылки снимков и автоматической записи прохождения флюорографии в базу данных, необходимо указать следующие настройки в аппарате (производится сотрудниками медицинской организации при согласовании с обслуживающим персоналом аппаратов).

DICOM ID: DVTK_STR_SCP

Порт: 105

IP: IP где установлен сервер КСАМУ

В программе пересланные данные можно посмотреть в справочнике «Регистр ЦАМИ» (рисунок 15, рисунок 16).

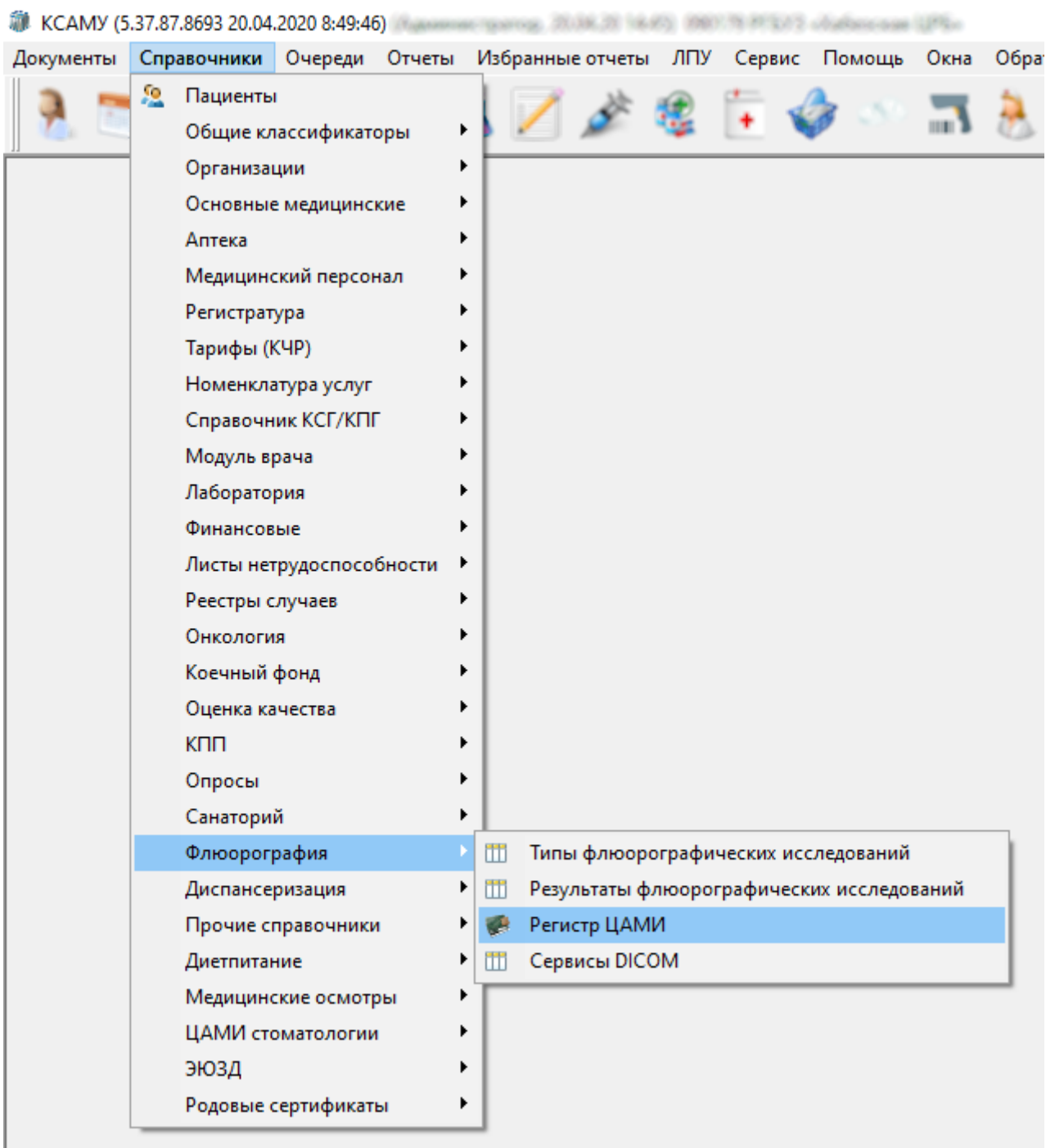


Рисунок 15 – Путь перехода к разделу «Регистр ЦАМИ»

Регистр: ЦАМИ

Поиск (по пациенту): Период: 12.06.2024 по 14.06.2024 Найти

Тип снимка: Все Результат исследования: Q X

Дата	Время	Пациент	Дата рождения пациента	Фирма производитель	Описание	Модуляция	Кабинет	Кабинет (Номер оборудования)	ис
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	19:52:23			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
12.06.2024	23:13:14			WANDONG Medical		DX		Y21-456-10-10	
13.06.2024	05:58:04			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	
13.06.2024	05:58:04			SevKavRoentgen-D, Co. Ltd.		DX		D0018F32	

Записей: 332 Отбор по периоду:

Рисунок 16 – Окно «Регистр: ЦАМИ»

Revision #4

Created 14 June 2024 07:04:21 by Навасардян Валерия

Updated 14 June 2024 07:17:18 by Навасардян Валерия